
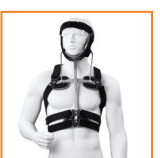
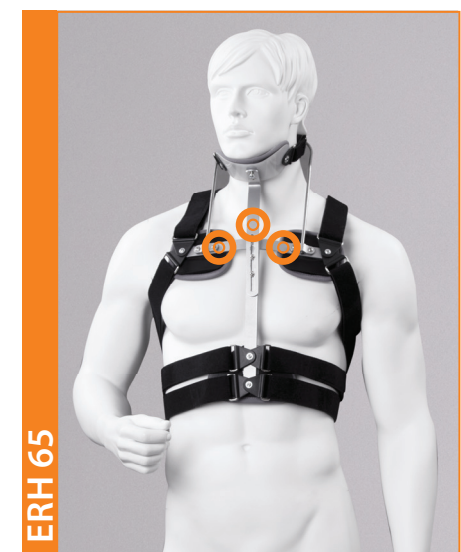
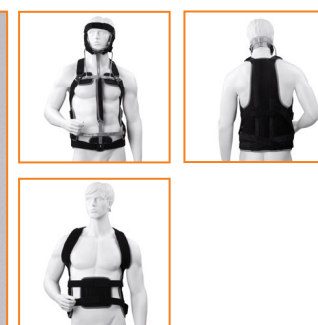
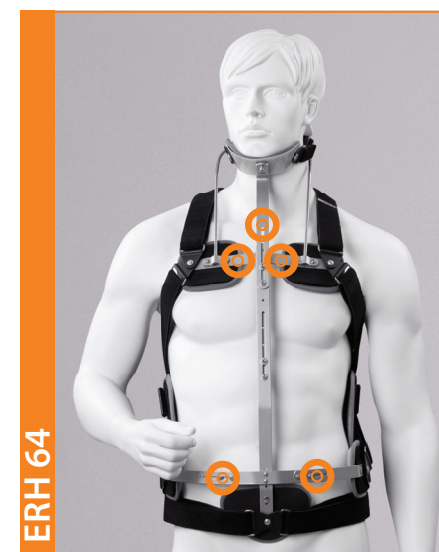


VERTEBRA^{SET}

Seria gorsetów ortopedycznych do stabilizacji kręgosłupa o budowie modułowej. Umożliwia dobór i zestawianie poszczególnych elementów według indywidualnych potrzeb pacjenta. Modułowy system dotyczy odcinka szyjno-piersiowego CTO, piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego TLSO oraz szyjno-piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego CTLSO.

www.erhem.pl/gorsety

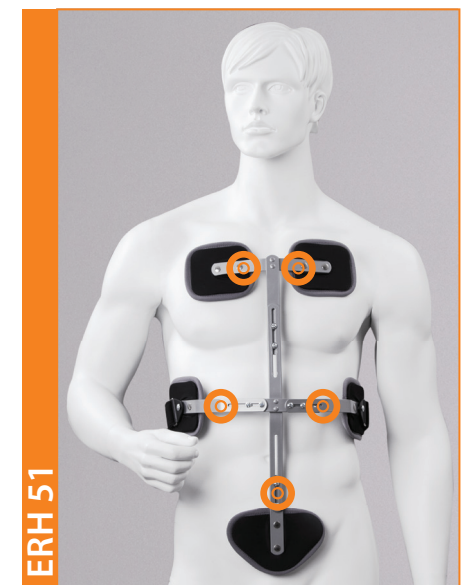

🎯 Możliwość dokładnego dopasowania zaznaczonych elementów poprzez ich doginanie.

DERH 65
GORSET SZKIELETOWY
KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWEGO



VERTEBRA SET

DERH 51
TRZYPUNKTOWY GORSET WG BAHLERA / VOIGTA



VERTEBRA SET

STABILIZACJA

Diadem i halo.



ZASTOSOWANIE

- Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych
- Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
- Zmiany zwyrodnieniowe - spondyloza / spondyloartroza
- Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
- Deformacje kręgosłupa

DZIAŁANIE

- Stabilizuje segmenty kręgosłupa w zakresie C3-Th3 lub C1-Th3.

WŁAŚCIWOŚCI

Część piersiowa

- Wykonana jest ze stelaża metalowego, nie wymagającego konserwacji.
- Miękkie wykończenia gorsetu zapewnia komfort stosowania z możliwością ich zdejmowania w celu przywrócenia czystości.

Część grzbietowa

- Wzmocniona jest 2 wyprofilowanymi metalowymi fiszbinami z możliwością indywidualnego formowania.
- Pasy dociągowe umożliwiają regulację kompresji części piersiowej oraz grzbietowej gorsetu.

Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego

- niską (diadem)
- wysoką (diadem i halo)

Otwarty charakter kołnierza ułatwia dostęp przednio-tylny oraz przyjmowanie pozycji leżącej.

ROZMIAR	S	L
WZROST PACJENTA W CM	do 145	powyżej 145

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

NFZ	9170.03	trwała	Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa	ERH 65
	9170.15	trwała	Półgorsetowa orteza szyjna	
	9180.11	czasowa		

ZASTOSOWANIE

- Doleczanie po gorsetowaniu gipsowym
- Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
- Stabilne złamania kompresyjne trzonów oraz wyrostków stawowych
- Złamania osteoporotyczne kręgów
- Zmiany zwyrodnieniowe

DZIAŁANIE


- Gorset o działaniu wyprostnym, stabilizuje i odciąża kręgosłupa TLS głównie w płaszczyźnie strzałkowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Gorset wykonany jest ze stelaża metalowego, nie wymagającego konserwacji
- Peloty na zakończeniach gorsetu posiadają miękkie obszycia, z możliwością ich zmiany na dodatkowy zestaw nakładek.
- Płynna regulacja wysokości oraz szerokości gorsetu, umożliwia jego indywidualne dopasowanie.
- Gorset posiada możliwość dodatkowego formowania pelot poprzez ich doginanie.

STABILIZACJA

Płynna regulacja długości i szerokości szyn.

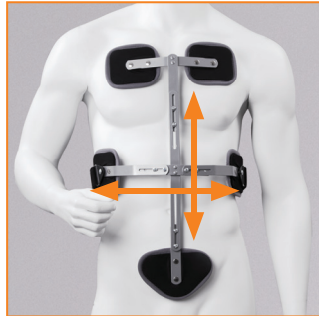

ROZMIAR UNIWERSALNY
REGULACJA ODLEGŁOŚCI PELOTY ŁONOWEJ OD MOSTKOWEJ W ZAKRESIE OD 37 DO 53CM

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

NFZ	9170.05	trwała	Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi	ERH 51
	9180.02	czasowa		
	9170.04	trwała	Gorset Jewetta	
	9180.01	czasowa		

DERH 63
GORSET JEWETTA

VERTEBRA SET



DERH 64
GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA
SZYJNO-PERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO

VERTEBRA SET



STABILIZACJA
Część grzbietowa opcjonalnie z ujęciem całego kręgosłupa.



Diadem i halo.



Diadem.



- ZASTOSOWANIE
- Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych w różnym mechanizmie
 - Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
 - Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
 - Złamania patologiczne kręgów
 - Doleczanie pooperacyjne
 - Deformacje kręgosłupa

DZIAŁANIE

- Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa między Th6 - L5.

- WŁAŚCIWOŚCI
- Część brzuszna umożliwia
- Regulację szerokości górnej części gorsetu.
 - Zmianę wysokości gorsetu przez regulację ram bocznych.
 - Przyjmowanie pozycji siedzącej dzięki profilowanej pelocie łonowej.
- Część grzbietowa
- niska – obejmująca odcinek lędźwiowy
 - wysoka – z ujęciem odcinka piersiowego-lędźwiowego
- Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:
- niską (diadem)
 - wysoką (diadem i halo)

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD W BIODRACH W CM	60-80	80-105	105-130
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PEŁOTĄ PIERSIOWĄ A ŁONOWĄ W CM	37-45	44-55	46-58

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

NFZ	9170.04	trwała	Gorset Jewetta	ERH 63
	9180.01	czasowa		
	9170.03	trwała		

- ZASTOSOWANIE
- Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych w różnym mechanizmie
 - Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
 - Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
 - Doleczanie pooperacyjne
 - Deformacje kręgosłupa
 - Złamania patologiczne

DZIAŁANIE

- Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa w zakresie C3-L5 lub C1-L5.

- WŁAŚCIWOŚCI
- Część brzuszna
- Zapewnia trzy płaszczyzny stabilizacji: ogranicza ruch zgięcia i wyprostu, skłonów bocznych oraz rotacji kręgosłupa.
 - Posiada regulację wysokościowo-szerokościową pelot tułowia oraz odcinka szyjnego.
 - W celu indywidualnego dopasowania gorset posiada możliwość dodatkowego formowania pelot poprzez ich doginanie.
- Część grzbietowa
- Umożliwia łatwą adaptację do wysokiej sznurówki półshtywniej z podpaszkami po zakończeniu leczenia z użyciem części brzusznej.
 - Wyposażona jest w 4 wyprofilowane, metalowe fiszbiny: 2 pionowe oraz 2 poziome z możliwością dodatkowego indywidualnego formowania.
- Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:
- niską (diadem)
 - wysoką (diadem i halo)

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD PASA W CM	65-80	80-95	95-110

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

NFZ	9170.03	trwała	Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa	ERH 64
	9170.05	trwała		
	9180.02	czasowa		
	9170.04	trwała		
	9180.01	czasowa		

STABILIZACJA
Diadem i halo.



Możliwość modyfikacji do wysokiej sznurówki z podpaszkami.

