

ERHEM

PRODUCENT ORTOTYKI



WYROBY DLA DOROSŁYCH

REHAORTHO

REHANEURO

REHAPROACTIVE



DZIAŁ SPRZEDAŻY

Umożliwi złożenie zamówienia oraz uzyskanie odpowiedzi związanych ze współpracą.

Tel.: 14 681 23 80

506 010 330

Fax: 14 681 23 85

poczta@erhem.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Odpowie na pytania dotyczące produktów i zamówień.

Tel.: 506 010 329

bok@erhem.pl

KOMPLEKSOWOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Firma ERHEM jest producentem obecnym na rynku od kilkunastu lat.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie wyrobów ortopedycznych, a także w produkcji elementów i podzespołów elektromechanicznych.

Szerokie zaplecze techniczne oraz wciąż poszerzane doświadczenie dają nam możliwość realizacji seryjnych oraz nietypowych projektów dostosowanych do indywidualnych wymagań pacjentów. Wszystkie produkty, od najmniejszych elementów, wykonywane są w naszym zakładzie.

IDEA

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działamy w sposób zintegrowany - w naszym zespole zatrudniamy osoby niepełnosprawne, co pozwala nam z większą empatią spojrzeć na potrzeby naszych klientów.

OFERTA

Stale doskonalimy proces produkcji i sprzedaży tak, aby finalnym efektem był produkt łączący innowacyjność z funkcjonalnym, a zarazem prostym działaniem.

Nasze wyroby stanowią uzupełnienie procesu kompleksowej REHABILITACJI pacjentów o odmiennych potrzebach i problematyce klinicznej.

NASZE PRODUKTY PODZIELILIŚMY NA TRZY GRUPY:



Wsparcie w procesie przywracania funkcji po znacznych urazach tkanek miękkich oraz kostnych.

Zabezpieczenie w pierwszym okresie po zabiegu.



Przeciwdziałanie powikłaniom.

Przywracanie mobilności oraz rozwijanie zdolności lokomocyjnych.



Profilaktyka urazów.

Ochrona w trakcie aktywności rekreacyjnej i sportowej.

Drobne urazy i przeciążenia.

WYRÓB INDYWIDUALNY

W przypadku, w którym niemożliwe jest zastosowanie wyrobu seryjnego, proponujemy wykonanie wyrobu na zamówienie indywidualne.


WYTWÓRCA
ERHEM Sp.j.
39-200 Dębica
ul. Puszkina 6
www.erhem.pl



ERH 38

STABILIZATOR NADGARSTKA

MOŻLIWOŚĆ STOPNIOWEGO
USUWANIA USZTYWNIEN

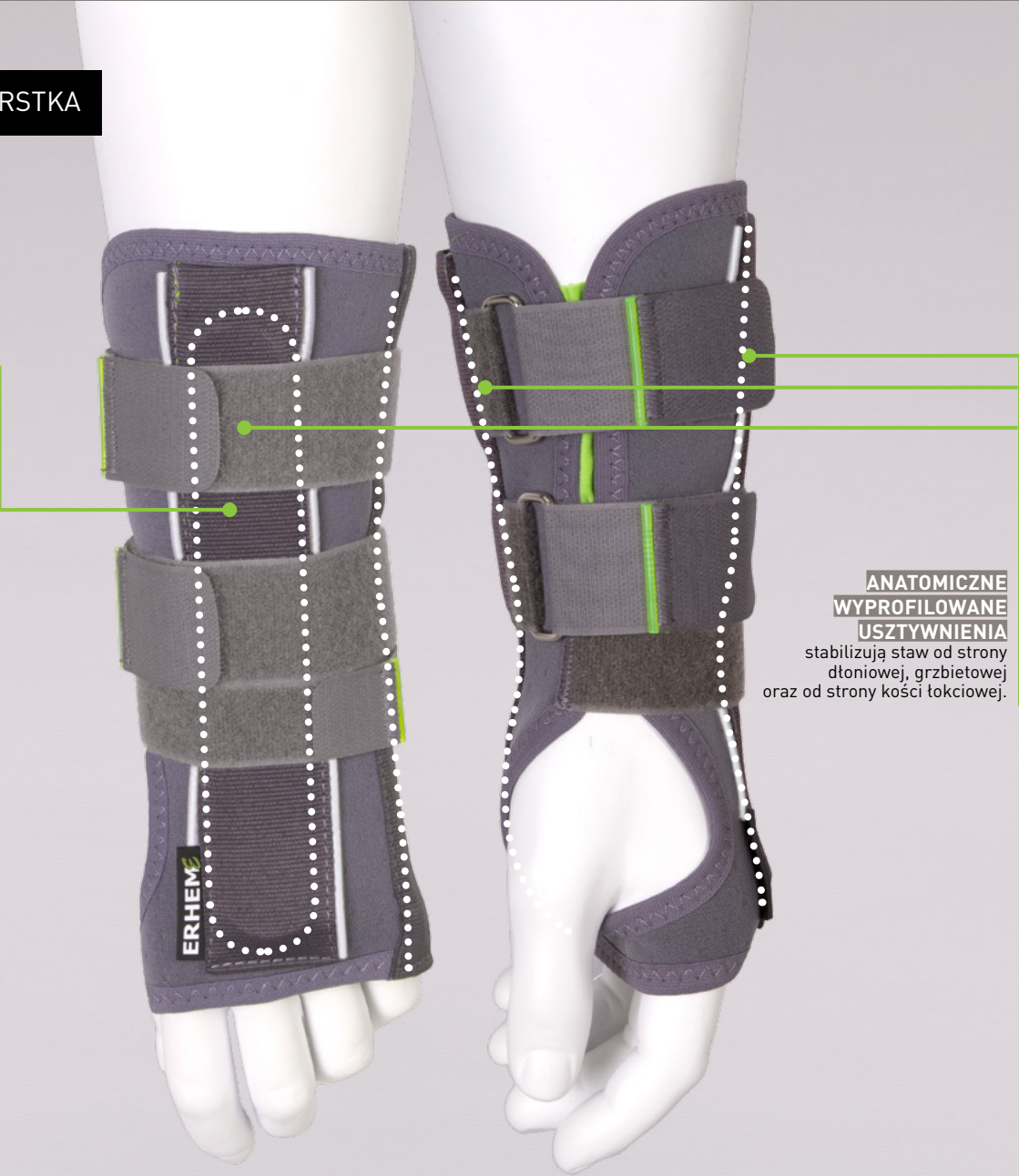

ANATOMICZNE
WYPROFILOWANE
USZTYWNIENIA
stabilizują staw od strony
dłoniowej, grzbietowej
oraz od strony kości łokciowej.

ZASTOSOWANIE

- / Urazy i uszkodzenia struktur w obrębie stawu.
- / Przeciążenia.
- / Złamania kości nadgarstka.
- / RZS.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i unieruchamia staw promieniowo-nadgarstkowy w ułożeniu funkcjonalnym.

ERH 38

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD NADGARSTKA	13-15	15-17	17-19	19-21
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 23 CM				
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ RĘKĘ				

NFZ /L.047

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca.


NFZ /L.048

Orteza na rękę i przedramię.

ERH 38/1

STABILIZATOR NADGARSTKA I KCIUKA

ANATOMICZNE
USZTYWNIENIA
stabilizują staw od strony
dłoniowej i grzbietowej.

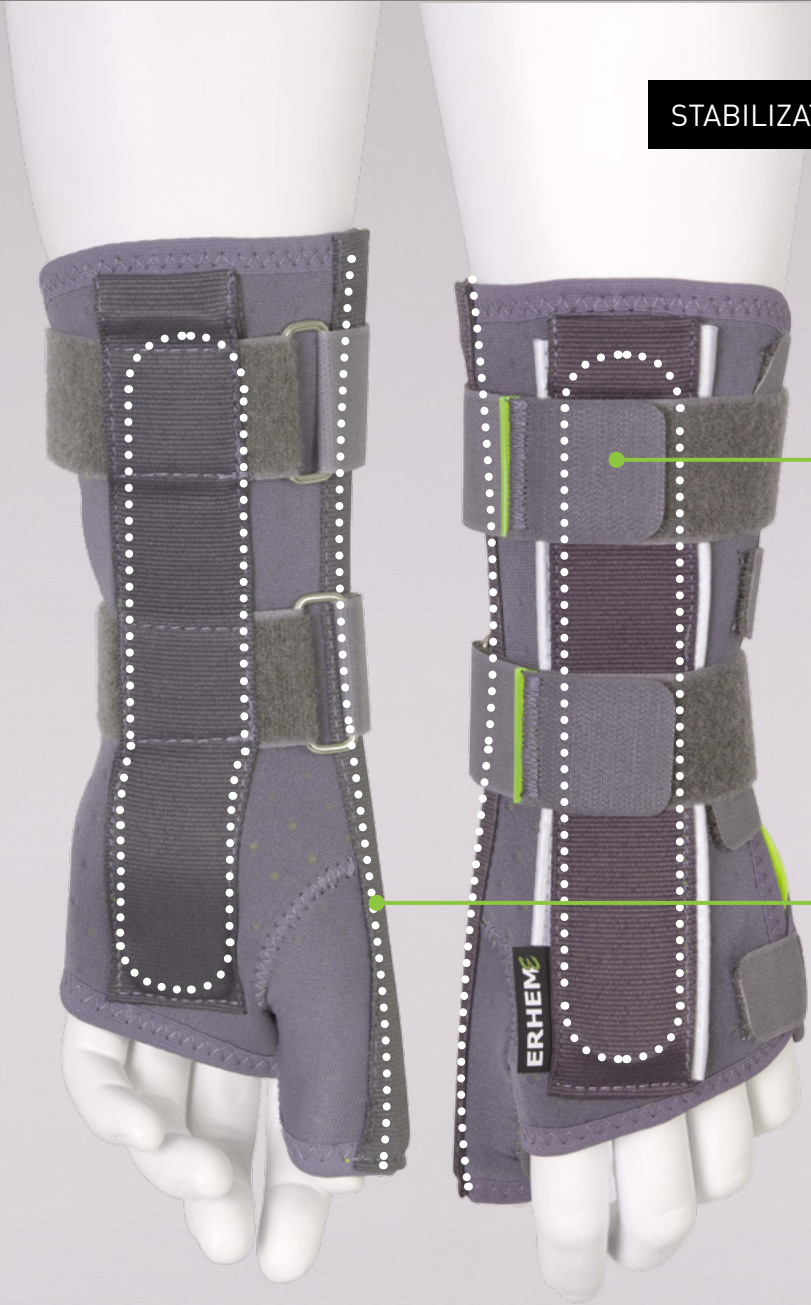

WYPROFILOWANE
USZTYWNIENIE
od strony kości promieniowej
unieruchamia również kciuk
w wyproście.

ZASTOSOWANIE

- / Urazy i uszkodzenia struktur w obrębie stawu.
- / Złamania kości nadgarstka oraz kciuka.
- / Zespół Quervain'a.
- / Przeciążenia.
- / RZS.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i unieruchamia staw nadgarstkowy oraz kciuk.

ERH 38/1

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD NADGARSTKA	13-15	15-17	17-19	19-21
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 23 CM				
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ RĘKĘ				

NFZ /L.047


Orteza ręki stabilizująca lub korygująca.

NFZ /L.048

Orteza na rękę i przedramię.

ERH 50

STABILIZATOR STAWU NADGARSTKOWEGO - UNIWERSALNY

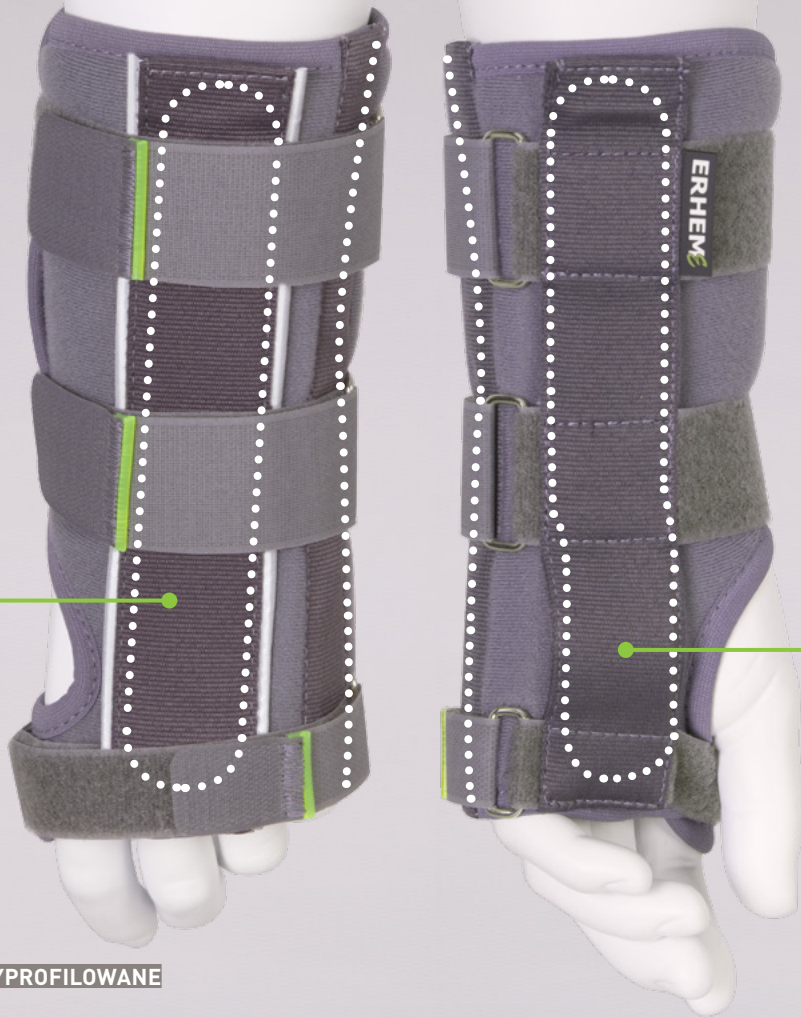

**ANATOMICZNIE WYPROFILOWANE
USZTYWNIENIA**
stabilizują staw od strony dłoniowej, grzbietowej
oraz od strony kości łokciowej.

**MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
POŁOŻENIA USZTYWNIENI**
pozwała uniwersalnie stosować
ortezę na prawą lub lewą rękę.

ZASTOSOWANIE

/ Urazy i uszkodzenia struktur
w obrębie stawu.
/ Zespół cieśni nadgarstka.
/ Złamania kości nadgarstka.
/ RZS.

DZIAŁANIE

/ Stabilizuje i unieruchamia staw
promieniowo-nadgarstkowy
w pozycji funkcjonalnej.

ERH 50

WYSOKOŚĆ ORTEZY: 23 CM
ROZMIAR UNIWERSALNY
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĘ

NFZ /L.047

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca.

NFZ /L.048

Orteza na rękę i przedramię.

ERH 47/1

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z ODWIEDZIONYM KCIUKIEM



**INDYWIDUALNE FORMOWANIE
CZĘŚCI DŁONIOWEJ**
umożliwia korekcję ustawienia dłoni
i palców.

MIEKKIE PASY DOCIĄGOWE
zapewniają optymalne dopasowanie.

ERH 47

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

ERH 47 | ERH 47/1

ROZMIAR	XS	S	M	L
OBWÓD NADGARSTKA	9-13	13-17	17-21	21-30
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	25	33	36	38
DŁUGOŚĆ NADGARSTEK-PALCE	14	17	18	19

NFZ /L.047

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca.

NFZ /L.048

Orteza na rękę i przedramię.

ZASTOSOWANIE

/ Złamania i pęknięcia kości ręki
oraz dalszej nasady kości przedramienia.
/ Porażenia i niedowłady
wiotkie oraz spastyczne.
/ Choroba zwyrodnieniowa stawów.
/ Przykurcz Dupuytren'a.
/ RZS.

DZIAŁANIE

/ Korygują ustawienie
oraz unieruchamiają staw nadgarstkowy,
dłoń i palce w optymalnej pozycji.


ERH 42/1

APARAT NA RAMIĘ I PRZEDRAMIĘ, SZYNOWO-OPASKOWY



CIENKIE SZYNY
Z RUCHOMYM PRZEGUBEM
STABILIZUJĄ BOCZNIE STAW
ŁOKCIOWY.

ZMIANA DŁUGOŚCI TAŚM
KRZYŻOWYCH
OGRA NICZA WYPROST
STAWU.

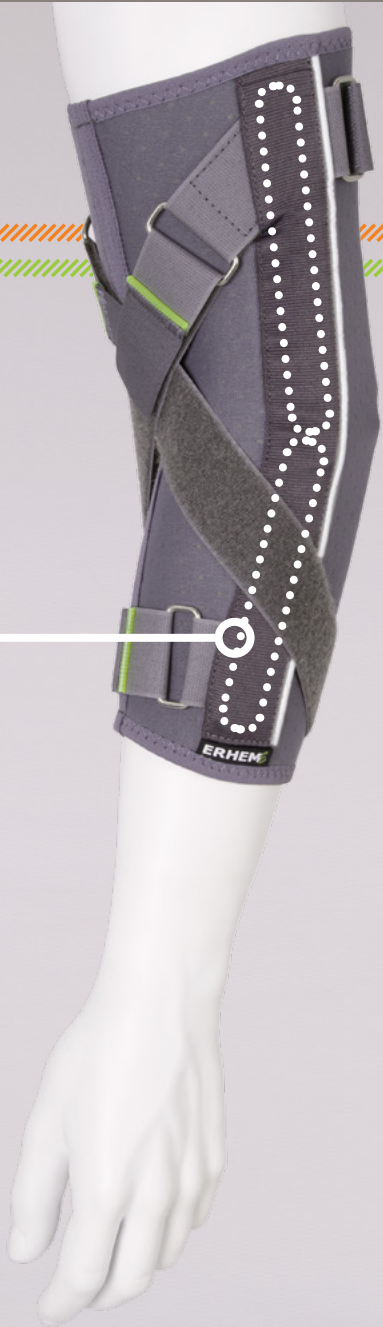

ERH 42

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO



RUCHOME PRZEGUBY W SZYNACH BOCZNYCH
umożliwiają unieruchomienie lub ograniczenie zakresu
zgięcia i wyprostu stawu co 15°.

MIEKKIE TAŚMY DOCIAGOWE
zapewniają anatomiczne dopasowanie.



ZASTOSOWANIE

- / Przeprost w stawie łokciowym.
- / Niestabilność stawu.
- / Ból w okolicy stawu o charakterze przeciążeniowym.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje oraz przeciwdziała przeprostowi stawu łokciowego.

ERH 42/1

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD PRZEZ STAW ŁOKCIOWY	23-25	25-28	28-31	31-34
OBWÓD PRZEDRAMIENIA 5 CM PONIŻEJ STAWU	21-23	23-25	25-28	28-31
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM				
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWY I LEWY ŁOKIEĆ				

NFZ /L.050

Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez.

ERH 42

ROZMIAR	S	M	L
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ORTEZY	27	36	44
OBWÓD RAMIENIA I PRZEDRAMIENIA UNIWERSALNY			

NFZ /L.049

Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez.

ZASTOSOWANIE

- / Pourazowe ograniczenia w stawie łokciowym wymagające redresji.
- / Złamanie i urazy wymagające unieruchomienia w określonej pozycji.
- / Przeprost w stawie łokciowym.
- / Niestabilność stawu.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje oraz unieruchamia staw łokciowy w żądanej pozycji.



ERH 56


APARAT NA RAMIĘ I PRZEDRAMIĘ

RUCHOME PRZEGUBY
umożliwiają unieruchomienie
lub ograniczenie zakresu zgięcia
i wyprostu stawu co 15°.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI DŁUGOŚCI
oraz demontażu części dłoniowej
obejmującej nadgarstek oraz śródreżce.

Pneumatyczny mechanizm wyprostny
powoduje ciągły oraz płynny ruch
rozciągania przykurczonych mięśni
zginających staw.

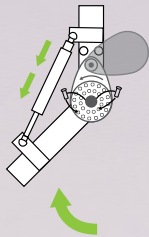

NEURO**extense** ERH 56/1

APARAT NA RAMIĘ I PRZEDRAMIĘ
REDRESUJĄCY STAW ŁOKCIOWY



ZASTOSOWANIE

- / Pozabiegowe unieruchomienie stawu łokciowego przebiegające z ograniczeniem ruchu i stopniowym jego zwiększaniem.
- / Pourazowe ograniczenia w stawie łokciowym wymagające redresji.
- / Złamanie i urazy wymagające unieruchomienia w określonej pozycji.

DZIAŁANIE

- / Stabilizują oraz korygują ustawienie stawu łokciowego, nadgarstkowego, dłoni i palców.

ERH 56 | ERH 56/1

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD NADGARSTKA	13-17	17-21	21-25
DŁUGOŚĆ SZYNY NADGARSTEK-ST. ŁOKCIOWY	14,5-17,5	23-27	23-27
DŁUGOŚĆ SZYNY RAMIENIA	13,5	13,5	22
CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA NADGARSTEK UNIWERSALNA			

NFZ /L.049

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ

KARTA POMIAROWA

Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez.

ERH 34/2 | ERH 54

ROZMIAR UNIWERSALNY
WERSJA NA PRAWY LUB LEWY BARK

NFZ /L.051 - dot. ERH 34/2

Orteza na ramię i bark.

ZASTOSOWANIE ERH 34/2

- / Pooperacyjnie po rekonstrukcji pierścienia rotatorów.
- / W stanach zapalnych kałek stawu barkowego oraz odbarczenia przestrzeni podbarkowej.
- / Stan po zwinięciu w stawie ramiennym.
- / Przeciążenia ścięgien.
- / Urazy splotu ramiennego.

ZASTOSOWANIE ERH 54

- / Złamanie w obrębie obręczy barkowej w okresie doleczenia.
- / Zwinięcia i zespoły bólowe w obrębie barku.
- / Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym.
- / Niedowłady i porażenia jako profilaktyka podwichnięcia głowy kości ramiennej.

ERH 34/2

APARAT ODWIEDZENIOWY BARKU 15°

ZAPEWNI 15° ODWIEDZENIE
W STAWIE RAMIENNYM.



ERH 54

TEMBŁAK DWUCZĘŚCIOWY

STABILIZUJE I ODCIĄŻA
kończynę górną
oraz obręcz barkową.



ERH 34

KAMIZELKA STAWU BARKOWEGO



ORTEZA WYKONANA JEST W WERSJI DWUSTRONNEJ.
Pozwala to na unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego ramienia.

NEUTRALNA, MIEKKA DZIANINA
nie zaburza właściwej trofiki skóry oraz spełnia warunki dobrej wentylacji.

ZASTOSOWANIE

- / Złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej.
- / Pourazowa niestabilność stawu.
- / Niedowłady i porażenia mięśni.
- / Stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz tkcia.

DZIAŁANIE

- / Stabilnie unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną i kompleks ramienno-barkowy.

ERH 34

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD KLATKI	70	80	90	120	130
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWY I LEWY BARK					

NFZ /L.052

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”.

ERH 34/1

APARAT NA RAMIĘ I BARK



SYSTEM SZELEK
nie powoduje przeciążeń i przesilen w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

WERSJA DWUSTRONNA APARATU
pozwala na unieruchomienie prawego oraz lewego ramienia.

ERH 34/1

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD KLATKI	70	80	90	120	130
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWY I LEWY BARK					

NFZ /L.051

Orteza na ramię i bark.

ZASTOSOWANIE


- / Złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej.
- / Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym.
- / Niedowłady i porażenia mięśni.
- / Stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz tkcia.

DZIAŁANIE

- / Aparat unieruchamia kończynę górną oraz bark.
- / Odciąża całą obręcz barkową.

ERH 59

STABILIZATOR STAWU BARKOWEGO

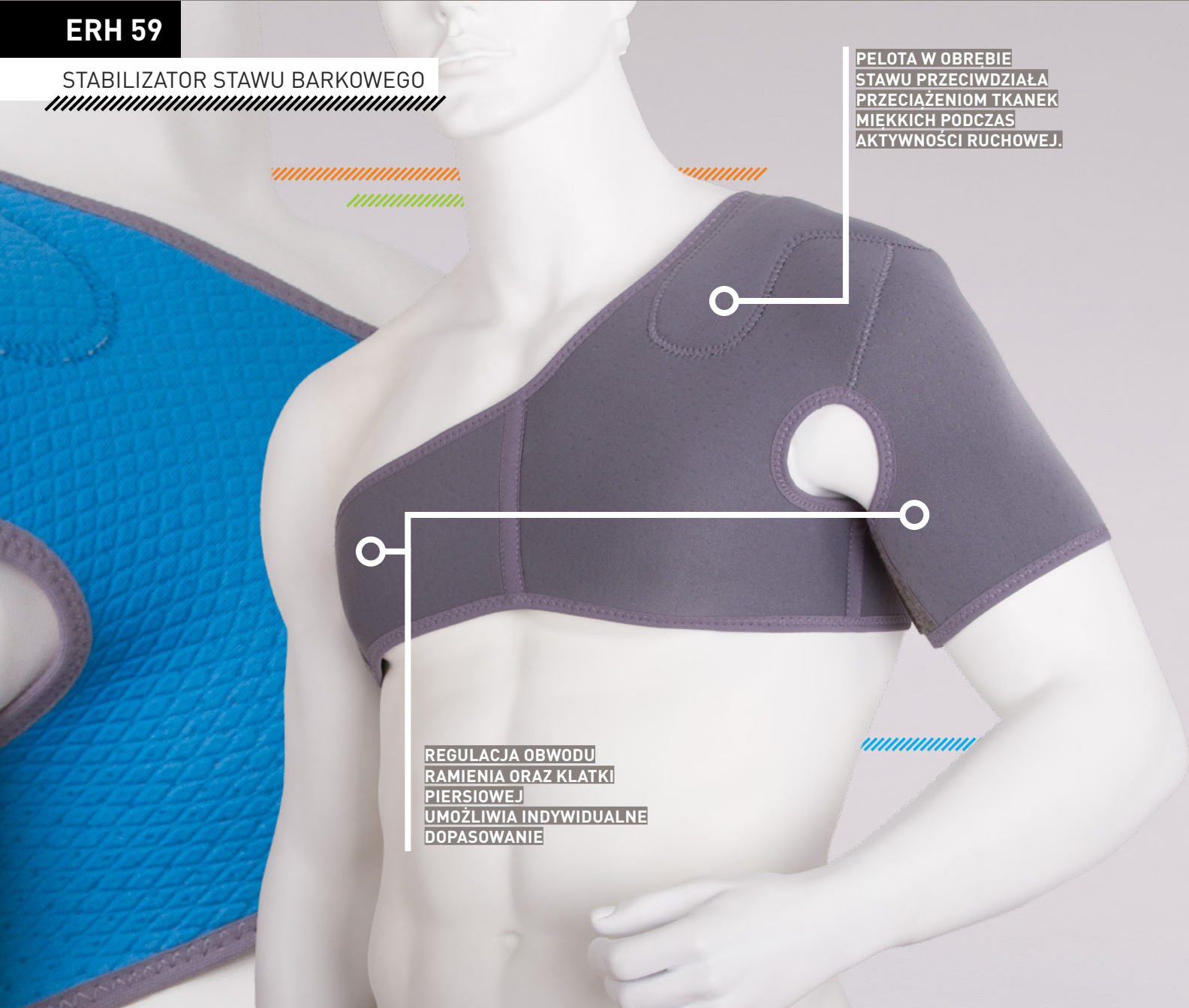

PEŁOTA W OBRĘBIE STAWU PRZECIWDZIAŁA PRZECIĄŻENIOM TKANEK MIĘKKICH PODCZAS AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ.

REGULACJA OBWODU RAMIENIA ORAZ KLATKI PIERSIOWEJ UMOŻLIWIA INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

ZASTOSOWANIE

- / Zespoły bólowe w obrębie obręczy barkowej.
- / Przeciążenia ścięgien.
- / Naciągnięcia więzadeł.
- / Nawykowe zwinięcia barku.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje staw ramienny.
- / Działając centrująco na staw poprawia jego funkcję.

ERH 59

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD KLATKI	70	80	90	120	130
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWY I LEWY BARK					

NFZ /L.051

Orteza na ramię i bark.



ERH 59/1

APARAT NA BARK, RAMIĘ I PRZEDRAMIĘ



Podtrzymując ciężar wiotkiej kończyny zapobiega nadmiernemu rozciąganiu torebki stawowej, więzadeł oraz ścięgien okołostawowych. Zapobiega to podwichnięciu w stawie ramiennym.

Regulacja długości taśm umożliwia repozycję głowy kości ramiennej, rotację zewnętrzną oraz lekkie odwiedzenie w stawie ramiennym.

ERH 59/1

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD KLATKI	80-90	90-100	100-110
OBWÓD RAMIENIA	24-28	28-32	32-36
WERSJA NA PRAWY LUB LEWY BARK			

NFZ /L.051

Orteza na ramię i bark.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony dla pacjentów z niewydolnością mięśni barku pochodzenia ortopedycznego oraz neurologicznego:

- / po rekonstrukcji pierścienia rotatorów,
- / stan zapalny w obrębie stawu barkowego,
- / zwinięcie barku,
- / porażenia i niedowłady wiotkie,
- / urazy splotu ramiennego.

DZIAŁANIE


- / Odciąża kończynę górną oraz obręcz barkową.
- / Stabilizuje staw ramienny.




PRZEGUBY Z REGULACJĄ ZGIĘCIA I WYPROSTU




1R/15°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15°.
(-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

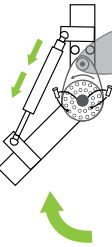


1R/15° NEUROEXTENSE
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15° oraz siłownik oddziałujący na przegub w kierunku wyprostnym.
(0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

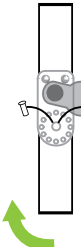

1R/30°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 30°.
(0°, 30°, 60°, 90°)

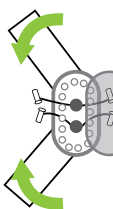


2R/20°
Dwuosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20°.
(0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°)

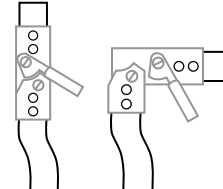


Lock Lever
Jednoosiowy przegub z rygłem zapadkowym. Pozwala poprzez uniesienie dźwigni na szybkie zwolnienie blokady wyprostu i uzyskanie pełnego zgięcia.

PRZEGUBY BEZ REGULACJI

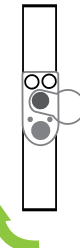

1
Jednoosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

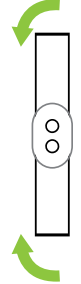

2
Dwuosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

BASIC SET

ERH 35/K

STR. 16



ERH 35

STR. 17



ERH 43

STR. 19



ERH 49

STR. 24



ERH 49/1

STR. 23



ERH 38

STR. 34



ERH 38/1

STR. 35



ERH 47/1

STR. 37



ERH 42

STR. 39



ERH 34

STR. 42



ERH 36

STR. 50



ERH 62

STR. 52



ERH 48/1

STR. 54



ERH 63

STR. 55



Wytwórca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach. Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Informacje zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia czy też innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista.

