

ERHEM

PRODUCENT ORTOTYKI



WYROBY DLA DOROSŁYCH

REHAORTHO

REHANEURO

REHAPROACTIVE



DZIAŁ SPRZEDAŻY

Umożliwi złożenie zamówienia oraz uzyskanie odpowiedzi związanych ze współpracą.

Tel.: 14 681 23 80

506 010 330

Fax: 14 681 23 85

poczta@erhem.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Odpowie na pytania dotyczące produktów i zamówień.

Tel.: 506 010 329

bok@erhem.pl

KOMPLEKSOWOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Firma ERHEM jest producentem obecnym na rynku od kilkunastu lat.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie wyrobów ortopedycznych, a także w produkcji elementów i podzespołów elektromechanicznych.

Szerokie zaplecze techniczne oraz wciąż poszerzane doświadczenie dają nam możliwość realizacji seryjnych oraz nietypowych projektów dostosowanych do indywidualnych wymagań pacjentów. Wszystkie produkty, od najmniejszych elementów, wykonywane są w naszym zakładzie.

IDEA

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działamy w sposób zintegrowany - w naszym zespole zatrudniamy osoby niepełnosprawne, co pozwala nam z większą empatią spojrzeć na potrzeby naszych klientów.

OFERTA

Stale doskonalimy proces produkcji i sprzedaży tak, aby finalnym efektem był produkt łączący innowacyjność z funkcjonalnym, a zarazem prostym działaniem.

Nasze wyroby stanowią uzupełnienie procesu kompleksowej REHABILITACJI pacjentów o odmiennych potrzebach i problematyce klinicznej.

NASZE PRODUKTY PODZIELILIŚMY NA TRZY GRUPY:



Wsparcie w procesie przywracania funkcji po znacznych urazach tkanek miękkich oraz kostnych.

Zabezpieczenie w pierwszym okresie po zabiegu.



Przeciwdziałanie powikłaniom.

Przywracanie mobilności oraz rozwijanie zdolności lokomocyjnych.



Profilaktyka urazów.

Ochrona w trakcie aktywności rekreacyjnej i sportowej.

Drobne urazy i przeciążenia.

WYRÓB INDYWIDUALNY

W przypadku, w którym niemożliwe jest zastosowanie wyrobu seryjnego, proponujemy wykonanie wyrobu na zamówienie indywidualne.

WYTWÓRCA
ERHEM Sp.j.
39-200 Dębica
ul. Puszkina 6
www.erhem.pl



REHAPROACTIVE *soft*

ZASTOSOWANIE

- Profilaktyka urazów i przeciążeń podczas ćwiczeń fizycznych oraz aktywności sportowej.
- Lekka niestabilność w wyniku osłabienia mięśni okostostawowych.
- Choroba zwyrodnieniowa.
- RZS.
- Ból i obrzęk stawu o charakterze przeciążeniowym.



ERH 35/M STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD 10 CM NAD KOLANEM	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ KOLANO					



ERH 38/2 STABILIZATOR NADGARSTKA - MIĘKKI

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD NADGARSTKA	13-15	15-17	17-19	19-21
DŁUGOŚĆ ORTEZY: 23 CM				
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĘ				

DZIAŁANIE

- Poprzez kompresję stawu stymulują receptory czucia głębokiego wpływając na poprawę świadomości czuciowo-ruchowej.
- W stopniu lekkim wspomagają stabilizację stawu.
- Poprzez utrzymanie właściwej ciepłoty wspomagają proces leczenia obrzęku i wysięku wewnątrzstawowego.



ERH 49/M STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO - MIĘKKI

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ	28-31	31-33	33-36	36-38
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ STOPE				




ERH 42/M STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO - MIĘKKI

ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD PRZEZ STAW ŁOKCIOWY	23-25	25-28	28-31	31-34
DŁUGOŚĆ ORTEZY: 30 CM				
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWY I LEWY ŁOKIEĆ				

REHAPROACTIVE

ERH 35/R/1

ORTEZA RZEPKI STABILIZUJĄCA

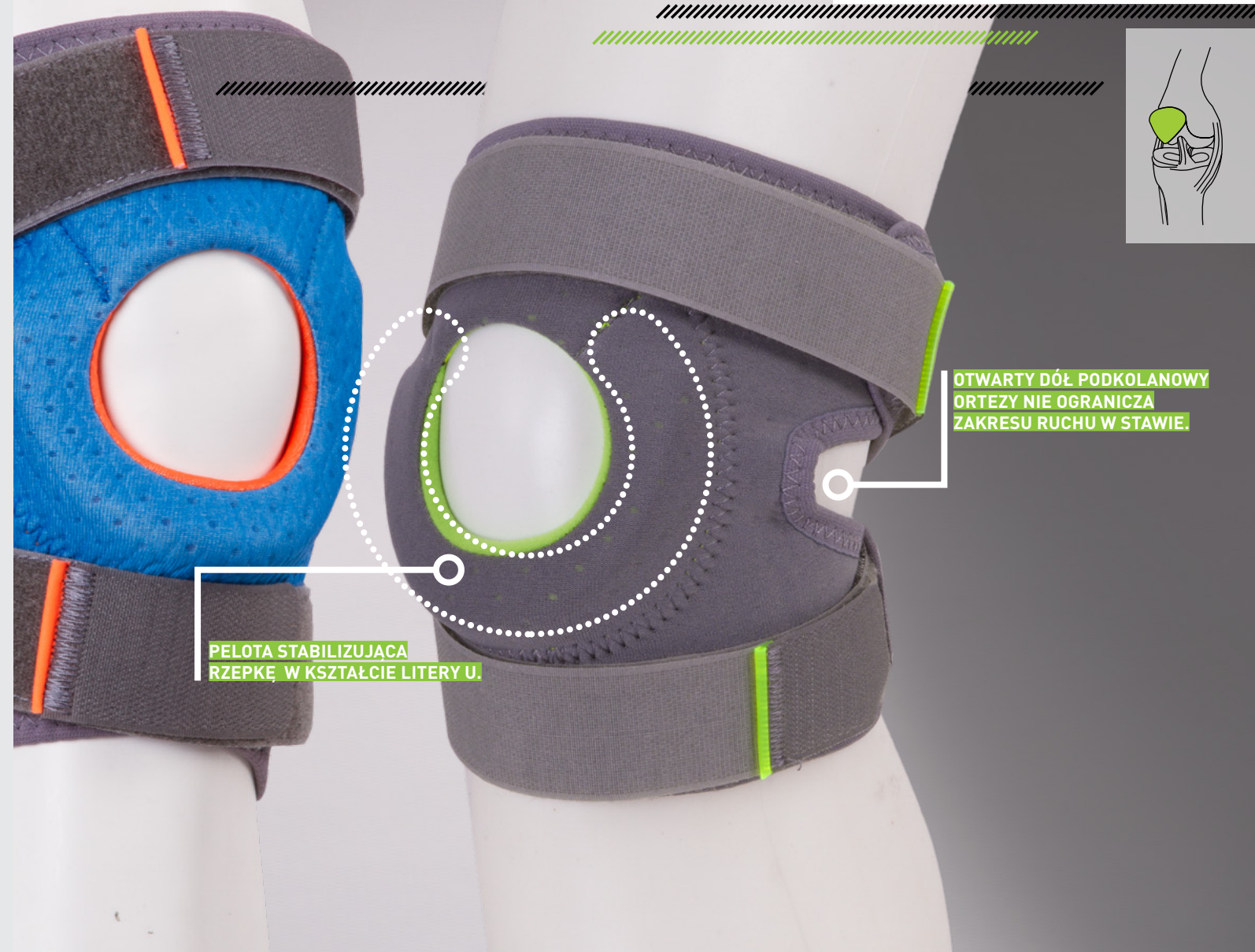

ERH 35/R/1

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD PRZEZ STAW KOLANOWY	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48

ZASTOSOWANIE

- / Profilaktyka urazów i przeciążeń.
- / Niestabilność stawu rzepkowo-udowego.
- / Nawykowe zwichnięcia rzepki; chondromalacja.
- / Ból i obrzęk w stawie o charakterze przeciążeniowym.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża staw rzepkowo-udowy.
- / Poprzez kompresję stawu stymuluje receptory czucia głębokiego wpływając na poprawę świadomości czuciowo-ruchowej.

ERH 35/R

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO
Z OTWOREM NA RZEPKĘ



OTWARTY DÓŁ PODKOLANOWY
ORTEZY NIE OGRANICZA ZAKRESU RUCHU
ZGIECIA W STAWIE.

MIEKKIE TAŚMY
ZAPEWNIĄĄ
INDYWIDUALNE DOPASOWANIE.

ZASTOSOWANIE

- / Profilaktyka urazów i przeciążeń.
- / Niestabilność stawu rzepkowo-udowego.
- / Nawykowe zwichnięcia rzepki; chondromalacja.
- / Ból i obrzęk w stawie o charakterze przeciążeniowym.

DZIAŁANIE


- / Stabilizuje i odciąża staw rzepkowo-udowy.
- / Poprzez kompresję stawu stymuluje czucie głębokie.

ERH 35/R

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					

ERH 35/F

ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ

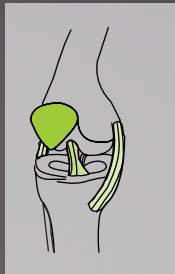

ELASTYCZNA PEŁOTA
STABILIZUJE I ODCIĄŻA
STAW RZEPKOWO-UDOWY.

ELASTYCZNE
METALOWE FISZBINY
WSPOMAGAJĄ
STABILIZACJĘ STAWU.

TAŚMY KRZYŻOWE
WSPOMAGAJĄ WIĘZADŁO ACL
ZABEZPIECZAJĄC PRZED NADMIERNYM
WYSUWANIEM PODUDZIA DO PRZODU.

ERH 35/F

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					

ZASTOSOWANIE

- / Pourazowa niestabilność stawu rzepkowo-udowego.
- / Zwichnięcia rzepki; chondromalacja.
- / Urazy więzadła właściwego rzepki.
- / Ból i obrzęk w stawie ocharakterze przeciążeniowym.
- / Lekka niestabilność stawu w następstwie urazu więzadeł.
- / Przeciążenia mięśni i więzadeł okostostawowych.


DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża staw rzepkowo-udowy.
- / W stopniu lekkim stabilizuje bocznie staw kolanowy.



ERH 35/F/U

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z PASAMI UKOŚNYMI

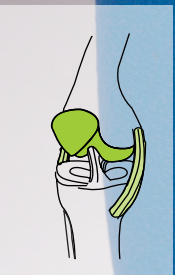

ELASTYCZNA PEŁOTA
STABILIZUJE I ODCIĄŻA
STAW RZEPKOWO-UDOWY.

TAŚMY KRZYŻOWE DODATKOWO
POZYCJONUJĄ I ZABEZPIECZAJĄ
PRZED ZWICHNIĘCIEM RZEPKI.

ELASTYCZNE METALOWE FISZBINY
PO BOKACH ORTEZY WSPOMAGAJĄ
STABILIZACJĘ STAWU.

ERH 35/F/U


ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					

DZIAŁANIE

- / Pourazowa niestabilność stawu rzepkowo-udowego.
- / Zwichnięcia rzepki; chondromalacja rzepki.
- / Urazy więzadła właściwego rzepki.
- / Ból i obrzęk w stawie o charakterze przeciążeniowym.
- / Lekka niestabilność stawu w następstwie urazu więzadeł.
- / Przeciążenia mięśni i więzadeł okostawowych.
- / W stopniu znacznym stabilizuje i odciaża staw rzepkowo-udowy.
- / W stopniu lekkim stabilizuje bocznie staw kolany.

ERH 35/K/S

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO - KRÓTKA - SPORT

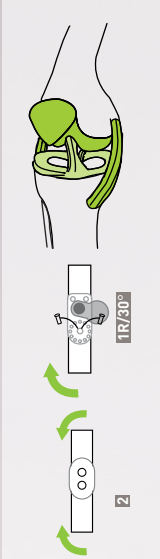

SZYNY BOCZNE POSIADAJĄ
MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO DEMONTAŻU
W CELU KONSERWACJI ORTEZY
LUB ZMIANY KĄTA W PRZEGUBACH
Z REGULACJĄ. (1R/30°)

BOCZNE SZYNY STABILIZUJĄCE
WYSTĘPUJĄ W WERSJI
Z DWUOSIOWYM PRZEGUBEM
BEZ REGULACJI (2)
LUB Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
ZGIECIA I WYPROSTU
CO 30° (1R/30°).

OTWARTY DÓŁ PODKOLANOWY
ZWIĘKSZA KOMFORT STOSOWANIA.

PEŁOTA WOKÓŁ RZEPKI
W WERSJI PÓŁOTWARTEJ
I ZAMKNIĘTEJ DODATKOWO
STABILIZUJE I ODCIĄŻA STAW
RZEPKOWO-UDOWY.

ERH 35/K/S

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					

NFZ /J.038

Orteza stawu kolannego z ruchomym stawem kolannym z regulacją kąta zgięcia.

ZASTOSOWANIE

- / Profilaktyka urazów i przeciążeń.
- / Zwichnięcia i urazy rzepki.
- / Ból oraz wysięk wewnątrzstawowy o charakterze przeciążeniowym.
- / Nieznaczna lub średnia niestabilność stawu w następstwie urazu więzadeł.
- / Urazy i uszkodzenia łątek.
- / Choroba zwyrodnieniowa stawów.

DZIAŁANIE

- / W stopniu średnim stabilizuje bocznie staw kolany oraz odciaża staw rzepkowo-udowy.
- / Umożliwia unieruchomienie stawu lub ograniczenie jego zakresu ruchu.

ERH 35/K

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO - KRÓTKA



TAŚMY DOCIĄGOWE
umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz właściwy stopień stabilizacji stawu.

DODATKOWA PELOTA
w wersji półotwartej i zamkniętej stabilizuje i odciąża staw rzepkowo-udowy.

**OTWARTY DÓŁ
PODKOLANOWY**
zwiększa komfort stosowania.

**BOCZNE SZYNY
Z RUCHOMYM PRZEGUBEM**
umożliwiają unieruchomienie lub ograniczenie zakresu zgięcia i wyprostu stawu co 15° lub 30°.



ZASTOSOWANIE

- / Zwichnięcia i urazy rzepki.
- / Choroba zwyrodnieniowa.
- / Średnia niestabilność stawu w następstwie urazów więzadeł.
- / Urazy i uszkodzenia łątek.
- / Ból i przeciążenia stawu.
- / RZS.

DZIAŁANIE

- / W stopniu średnim stabilizuje bocznie staw kolanowy oraz odciąża staw rzepkowo-udowy.
- / Umożliwia unieruchomienie stawu w dowolnej pozycji lub ograniczenie jego zakresu ruchu.

ERH 35/K

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: 30 CM					

NFZ /J.038

Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia.

ERH 35

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO



TAŚMY DOCIĄGOWE
umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz właściwy stopień stabilizacji stawu.

FUNKCJONALNA SZYNA
z przegubem 1R/15° prowadzi staw zgodnie z anatomicznym przebiegiem osi kończyny.

**OTWARTY DÓŁ
PODKOLANOWY**
zwiększa komfort stosowania.

ERH 52

APARAT NA GOLEŃ I UDO



ERH 35 | ERH 52

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD RZEPKĄ	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
OBWÓD ŁYDKI 10 CM POD RZEPKĄ	29-31	31-35	35-39	39-43	43-48
WYSOKOŚĆ ORTEZY: ERH 35 - 40 CM, ERH 52 - 43 CM					

NFZ /J.039

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości.

ZASTOSOWANIE

- / Choroba zwyrodnieniowa stawów.
- / Znaczna niestabilność stawu w następstwie uszkodzenia więzadeł.
- / Urazy i uszkodzenia łątek.
- / Stan po zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie stawu.
- / Odciążenie stawu rzepkowo-udowego.
- / Ból i przeciążenia stawu.
- / RZS.

DZIAŁANIE

- / W stopniu średnim stabilizuje bocznie staw kolanowy oraz odciąża staw rzepkowo-udowy.
- / Umożliwia unieruchomienie stawu w dowolnej pozycji lub ograniczenie jego zakresu ruchu.

ERH 43

APARAT MODUŁOWY OTWARTY



POLICENTRYCZNE PRZEGUBY SZYN BOCZNYCH
umożliwiają regulację kąta zgięcia i wyprostu co 20° lub co 15°.

ERH 43/1

APARAT MODUŁOWY OTWARTY Z KAPĄ



KAPA STAWU KOLANOWEGO
dodatkowo stabilizuje staw w wyproście oraz ułatwia pionizację.

ZASTOSOWANIE

- / Pourazowe oraz pozabiegowe unieruchomienie stawu kolanowego przebiegające z ograniczeniem ruchu i stopniowym jego zwiększaniem.
- / Stan po złamaniach.
- / Niestabilność w następstwie urazu aparatu więzadłowego.
- / Stan po zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie stawu.
- / Urazy i uszkodzenia łątek.

/ Niestabilność stawu na skutek schorzeń neurologicznych.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża staw kolanowy.
- / Umożliwia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.

ERH 43 | ERH 43/1

ROZMIAR	XXS	XS	S	M	L	XL
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ORTEZY	28	34	40	47	54	60
OBWÓD UDA I PODUDZIA UNIWERSALNY						
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ NOGĘ						

NFZ /J.039

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleni i udo, z regulacją zakresu ruchomości.

ERH 43 / UNIVERSAL

APARAT MODUŁOWY OTWARTY



MIĘKIE TAŚMY DOCIAGOWE
posiadają możliwość indywidualnego oraz ustalenia ich długości poprzez docinanie.

RUCHOMY PRZEGUB
umożliwia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu zgięcia i wyprostu stawu co 15° 1R/15°.

FUNKCYJONALNA SZYNA
prowadzi staw zgodnie z anatomicznym przebiegiem osi kończyny.

REGULACJA DŁUGOŚCI SZYN BOCZNYCH
umożliwia łatwe oraz szybkie dopasowanie do indywidualnej długości kończyny.

UNIWERSALNOŚĆ STOSOWANIA ORTEZY
w późniejszym okresie rehabilitacji poprzez stopniową rezygnację z dystalnych pelot.



ZASTOSOWANIE

- / Pourazowe oraz pozabiegowe unieruchomienie stawu kolanowego przebiegające z ograniczeniem ruchu i stopniowym jego zwiększaniem.
- / Stan po złamaniach.
- / Niestabilność w następstwie urazu aparatu więzadłowego.
- / Stan po zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie stawu.
- / Urazy i uszkodzenia łątek.

/ Niestabilność stawu na skutek schorzeń neurologicznych.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża staw kolanowy.
- / Umożliwia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.

ERH 43 / UNIVERSAL

UNIWERSALNY ROZMIAR OBWODOWO-DŁUGOŚCIOWY
DŁUGOŚĆ ORTEZY REGULOWANA W ZAKRESIE 47-62 CM
DŁUGOŚĆ ORTEZY PO USUNIĘCIU SKRAJNYCH PEŁOT: 32 CM
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ NOGĘ

NFZ /J.039

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleni i udo, z regulacją zakresu ruchomości.

ERH 45

ORTEZA TUTOROWA OTWARTA



BOCZNE ORAZ TYLNE METALOWE USZTYWNIENIA
unieruchamiają kończynę w wyproście, względnie w 20° zgięciu.



REGULOWANE PASY DOCIAGOWE
umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz oczekiwaną kompresję.

KOMFORT UŻYTKOWANIA
zapewniają miękkie oraz naturalne materiały eliminujące ryzyko otarć i odleżyn.

SZYBKI ORAZ ŁATWY DEMONTAŻ
elementów miękkich umożliwia utrzymanie czystości ortezy.

ZASTOSOWANIE

Pourazowe oraz pozabiegowe unieruchomienie stawu kolanowego w następstwie:
/ urazów i uszkodzeń aparatu więzadłowego,
/ rekonstrukcji w obrębie stawu,
/ złamań oraz ich powikłań.

DZIAŁANIE

/ Orteza o działaniu statycznym.
/ Unieruchamia i stabilizuje w wyproście staw kolanowy.

ERH 45

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
OBWÓD UDA 20 CM NAD RZEPKĄ	30-38	38-44	44-50	50-54	PONAD 54
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ORTEZY	30	40	50	60	70

ERH 46/1

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO JEDNOSZYNOWA



SKOŚNIE PRZEBIEGAJĄCY PASEK
wspomaga stabilizację oraz korekcję osi stawu.

OTWARTY CHARAKTER ORTEZY
ułatwia jej zakładanie.

BOCZNY ZEGAR STAWU
umożliwia regulację kąta zgięcia i wyprostu.

ERH 46

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO JEDNOSZYNOWA

ERH 46/2

APARAT JEDNOSZYNOWY STABILIZUJĄCY STAW KOLANOWY



ERH 46 | ERH 46/1 | ERH 46/2

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
OBWÓD UDA 10 CM NAD STAWEM	34-38	38-45	45-52	52-60	60-67
WYSOKOŚĆ ORTEZY: ERH 46, ERH 46/1 - 40 CM, ERH 46/2 - 30CM					
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ NOGĘ					

NFZ /J.038

Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia.

ZASTOSOWANIE


/ Zaburzenia osi stawu - koślawość, szpotawość.
/ Urazy i uszkodzenia łąkotek.
/ Niestabilność w następstwie uszkodzenia aparatu więzadłowego.
/ Niestabilność w następstwie porażeń i niedowładów mięśni.

DZIAŁANIE

/ Stabilizuje bocznie i skrętnie staw kolanowy.
/ Koryguje zaburzenia osi stawu przeciwdziałając jego koślawości i szpotawości.

ERH 49/2

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

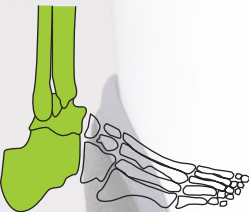

MIEKKIE TAŚMY
REGULUJĄ STOPIEŃ KOMPRESJI
ORAZ UNIERUCHOMIENIA
STAWU W OKRESIE POWROTU
DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

ANATOMICZNIE WYPROFILOWANE
ŁUSKI BOCZNE, ZABEZPIECZAJĄ
STAW SKOKOWY PRZED RUCHAMI
BOCZNYMI I SKRETNymi
NIEOGNICZAJĄC RUCHU ZGIĘCIA
I WYPROSTU.

ZASTOSOWANIE

- / Skrećenia i niestabilnořć stawu.
- / Naciągnięcia i naderwania w obrębie aparatu więzadłowego.
- / Zniekształcenia stawu skokowego.
- / Doleczanie po urazach torebki stawowej.

DZIAŁANIE

- / W stopniu lekkim stabilizuje bocznie-przyśrodkowo staw skokowy, nie ograniczając ruchu zgięcia i wyprostu stopy.

ERH 49/2

ROZMIAR UNIWERSALNY


WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE

NFZ /J.036

Orteza stabilizująca staw skokowy.

ERH 49/1

TUTOR UNIERUCHAMIAJĄCY STOPE I STAW SKOKOWY - SPORT

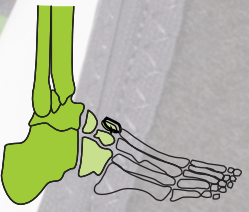

OTWARTY TYŁ
UŁATWIA SZYBKIE ZAKŁADANIE
I ZDEJMOWANIE ORTEZY.

ANATOMICZNIE WYPROFILOWANE
ŁUSKI STABILIZUJĄ POBOCZNIE
STAW SKOKOWY W POZYCJI
POŚREDNIEJ NIE OGRNICZAJĄC
RUCHU ZGIĘCIA.

SKOŚNIE PRZEBIEGAJĄCY PASEK
DODATKOWO ZABEZPIECZA
PRZED NADMIERNĄ SUPINACJĄ
(ODWRACANIEM) STOPY.

ERH 49/1

ROZMIAR

S

M

ROZMIAR BUTA

34-39

40-46

WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE

NFZ /J.036

Orteza stabilizująca staw skokowy.

ZASTOSOWANIE


- / Profilaktyka urazów podczas aktywności sportowej.
- / Nawykowe zwinięcia stawu skokowego.
- / Niestabilność boczno-przyśrodkowa.
- / Urazy aparatu więzadłowego.

DZIAŁANIE

- / W stopniu średnim stabilizuje bocznie-przyśrodkowo staw skokowy, nie ograniczając ruchu zgięcia i wyprostu stopy.

ERH 49

ORTEZA STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

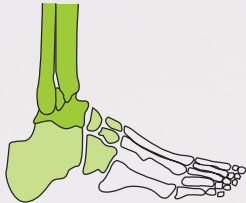

TAŚMY KRZYŻOWE
stabilizują stopę w pozycji pośredniej oraz określają zakres ruchu zgięcia i wyprostu.



BOCZNE ELASTYCZNE FISZBINY
stabilizują staw w trakcie ruchów bocznych oraz skrętnych.



OPCJONALNE ZASTOSOWANIE SZTYWNYCH FISZBIN
zapewnia mocną stabilizację w pierwszym okresie po urazie.

- ZASTOSOWANIE**
- / Skręcenia i niestabilność stawu.
 - / Naciągnięcia i uszkodzenia więzadłowe.
 - / Zniekształcenia stawu.

- DZIAŁANIE**
- / Stabilizuje staw skokowy górny oraz dolny.

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ	25-28	28-31	31-33	33-36	36-38
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ STOPE					

NFZ / J.036
Orteza stabilizująca staw skokowy.

ERH 49/4

PODCIĄG NA OPADAJĄCĄ STOPE



Łatwa regulacja długości podciągu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie siły podciągającej stopę w trakcie chodu.

Możliwość łatwego zastosowania ortezy zarówno w obuwiu codziennym jak i sportowym oraz szybkiego demontażu podciągu.



ROZMIAR
OBWÓD NAD STAWEM SKOKOWYM 22-30 CM
WERSJA UNIWERSALNA NA PRAWĄ I LEWĄ STOPE

- ZASTOSOWANIE**
- / Zaburzenia chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 - / Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy
 - / Porażenie nerwu strzałkowego.

- DZIAŁANIE**
- / Orteza wspomaga zgięcie grzbietowe stopy zapobiegając przed jej opadaniem.
 - / Umożliwia korekcję supinacji lub pronacji stopy.

ERH 49/3 ORTHO

APARAT TULEJKOWY NA PODUDZIE Z SANDAŁEM



ZASTOSOWANIE

- / Skrećenia i zwichnięcia stawu; nawykowe zwichnięcia.
- / Niestabilność stawu; urazy więzadłowe.
- / Złamania w obrębie stawu oraz stępu.

DZIAŁANIE

- / W stopniu znacznym stabilizuje pobocznie staw skokowy oraz kości stępu, ograniczając supinację i pronację stopy przy zachowaniu pełnego ruchu zgięcia i wyprostu w stawie.

ERH 49/3 ORTHO

ROZMIAR	S	M	L
DŁUGOŚĆ STOPY W CM	24-26	27-29	30-31
OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ	31-34	34-37	37-40
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE			

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ

KARTA POMIAROWA

NFZ /J.037

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleni i stopę.

NFZ /H.029

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

ERH 71 ORTHO

APARAT TULEJKOWY NA PODUDZIE Z SANDAŁEM



ZASTOSOWANIE

- / Aparat przeznaczony dla pacjentów z zaburzeniami chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego i obwodowego układu nerwowego.
- / Brak lub osłabienie zgięcia grzbietowego stopy.
- / Porażenie nerwu strzałkowego.
- / Niestabilność stawu skokowego.
- / Deformacje i zaburzenia osi stawu.
- / Złamania.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje stopę i staw skokowy.
- / Ogranicza zgięcie podszwowe oraz supinację stopy.

ERH 71 ORTHO

ROZMIAR	S	M	L	XL
WYSOKOŚĆ ORTEZY	31	34	37	40
DŁUGOŚĆ STOPY W CM	OD 23 DO 30 CM (CO 1 CM)			
ZALECANA WYSOKOŚĆ ORTEZY TO POŁOWA BRZUŚCA M. TRÓJGŁOWEGO				
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE				

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ

KARTA POMIAROWA

NFZ /J.037

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleni i stopę.


NFZ /H.029

INDYWIDUALNY


Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

ERH 49/3 NEURO

APARAT TULEJKOWY NA PODUDZIE Z SANDAŁEM

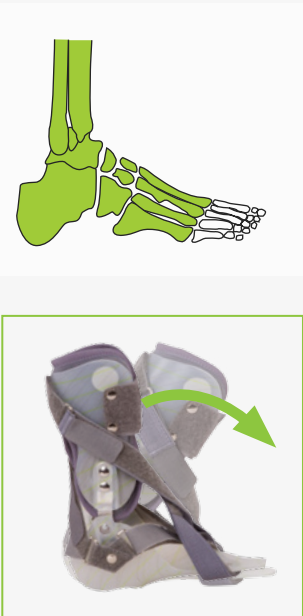

Uwolniona kość piętowa posiada możliwość kontaktu z podłożem dla zapewnienia czucia głębokiego.

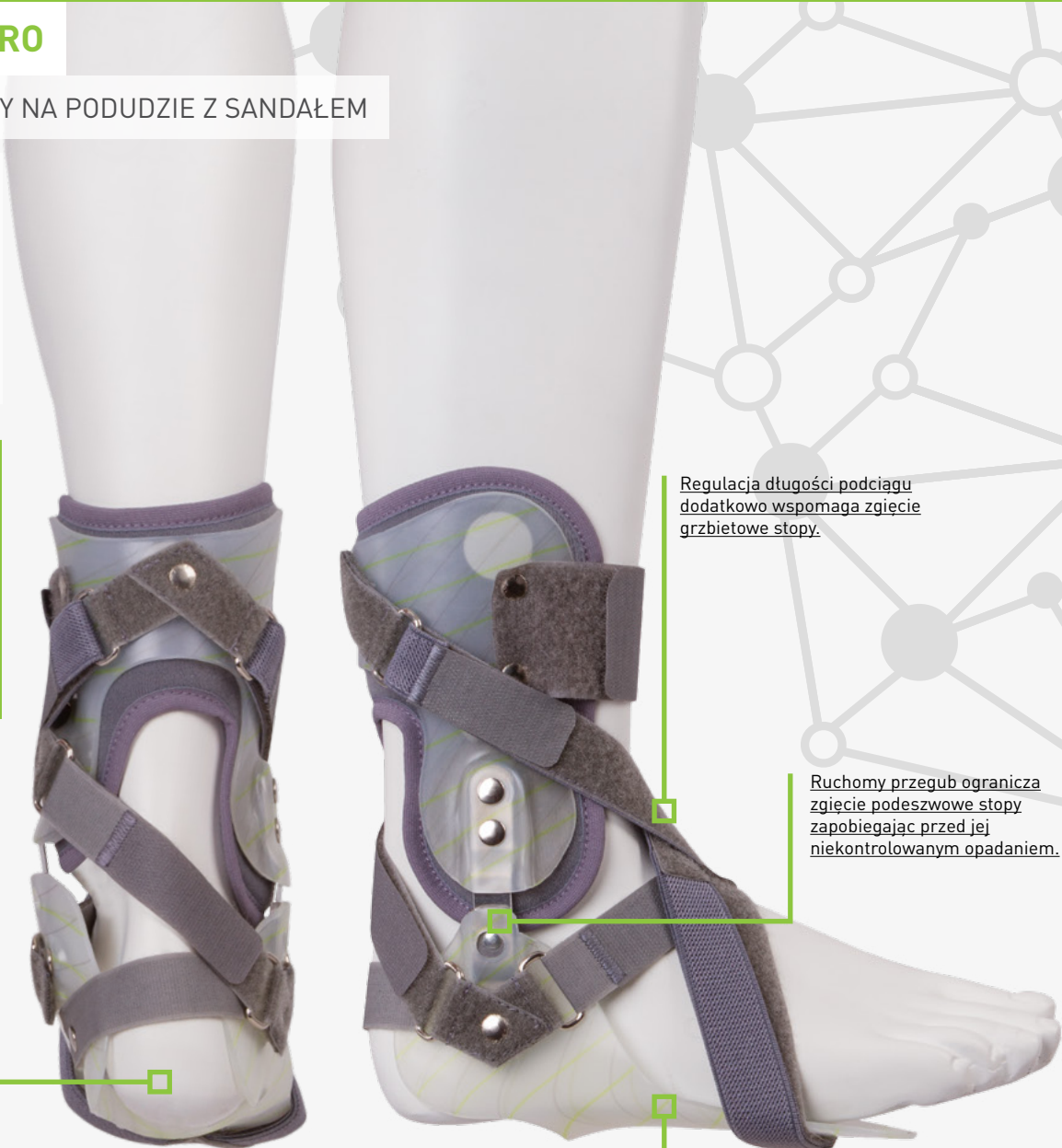

Regulacja długości podciagu dodatkowo wspomaga zgięcie grzbietowe stopy.

Ruchomy przegub ogranicza zgięcie podaszowe stopy zapobiegając przed jej niekontrolowanym opadaniem.

Część stopowa obejmuje 2/3 stopy podpierając dalsze głowy kości śródstopia od 2 do 5.

ZASTOSOWANIE

- / Zaburzenia chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
- / Ostabienie zgięcia grzbietowego stopy.
- / Porażenie nerwu strzałkowego.
- / Skręcenia i zwichnięcia stawu.
- / Niestabilność stawu; urazy więzadłowe.
- / Złamanie w obrębie stawu, stępu oraz śródstopia.

DZIAŁANIE

- / W stopniu znacznym stabilizuje pobocznie staw skokowy, kości stępu oraz śródstopia.
- / Ogranicza zgięcie podaszowe stopy z zachowaniem pełnego ruchu zgięcia grzbietowego.
- / Ogranicza supinację i pronację stopy.

ERH 49/3 NEURO

ROZMIAR	S	M	L
DŁUGOŚĆ STOPY W CM	24-26	27-29	30-31
OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ	31-34	34-37	37-40
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE			

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ KARTA POMIAROWA

NFZ /J.037

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na gołej i stopę.

NFZ /H.029

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

ERH 71 DYNAMIC

APARAT TULEJKOWY NA PODUDZIE Z SANDAŁEM



Sprężyste tworzywo dynamicznie przywraca stopę do pozycji pośredniej podczas chodu.



Orteza dostosowana jest do noszenia w obuwiu.

Anatomicznie wyprofilowana część stopowa dobrze stabilizuje kość piętową oraz wspiera łuk podłużny stopy.

ERH 71 DYNAMIC

ROZMIAR	S	M	L	XL
DŁUGOŚĆ STOPY W CM	23-24	25-26	27-28	29-30
WYSOKOŚĆ ORTEZY	31	32	33	34
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ STOPE				

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ KARTA POMIAROWA

NFZ /J.037

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na gołej i stopę.

NFZ /H.029

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

ZASTOSOWANIE

- / Aparat przeznaczony dla pacjentów z zaburzeniami chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego i obwodowego układu nerwowego.
- / Brak lub osłabienie zgięcia grzbietowego stopy.
- / Porażenie nerwu strzałkowego.
- / Niestabilność stawu skokowego.
- / Deformacje i zaburzenia osi stawu.
- / Złamanie.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje stopę i staw skokowy.
- / Ogranicza zgięcie podaszowe oraz supinację stopy.

ERH 67/1 NEUROextense

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY NA CAŁĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ Z SANDAŁEM


ZASTOSOWANIE

Aparaty przeznaczone są dla pacjentów ze zmniejszoną siłą mięśnia czworogłowego uda lub przykurczem lub spastyką zginaczy stawu kolanowego oraz stopy w przebiegu:

- / pourazowego uszkodzenia mózgu,
- / stwardnienia rozlanego,
- / udaru mózgu,
- / mózgowego porażenia dziecięcego,
- / przepukliny oponowo-rdzeniowej,
- / powikłań po złamaniu.

DZIAŁANIE

/ Stabilizują kończynę dolną.
/ Oddziałują wyprostnie na staw kolanowy.

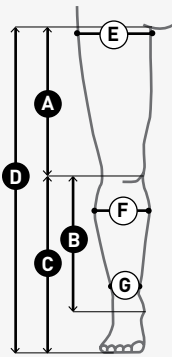

ERH 67/1		ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
DŁUGOŚĆ ORTEZY NA ODCINKU	A	ST. KOLANOWY-PACHWINA	15	18	21	24	27
	B	ST. KOLANOWY-ST. SKOKOWY	15	20	30	35	38
	C	ST. KOLANOWY-BRZEG ZEW. STOPY	27	33	44	50	54
	D	CAŁKOWITA	42	51	65	74	81
OBWÓD ORTEZY	E	W SKRAJNEJ CZĘŚCI UDOWEJ	34	40	46	52	58
	F	NA WYSOKOŚCI BRZUŚCA M. TRÓJGŁOWEGO	24	28	32	36	40
	G	NAD ST. SKOKOWYM	20	21	22	23	24
		DŁUGOŚĆ STOPY OD 23 DO 30 (CO 1 CM)					

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ
KARTA POMIAROWA

NFZ /J.043

Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym.

NFZ /H.030 INDYWIDUALNY

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy KAFO.


Możliwość regulacji długości oraz demontażu części stopowej.

Dodatkowe ujęcie stopy pozwala na utrzymanie prawidłowej długości mięśni zginających stopę.

NEUROextense ERH 52/1

APARAT NA GOLEŃ I UDO REDRESUJĄCY STAW KOLANOWY

Pneumatyczny mechanizm wyprostny stawu występuje w wersji:


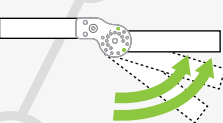


SPASTIC

dla pacjentów z dużą spastyką oraz przykurczami zginaczy kolana. Powoduje równomierny oraz ciągły ruch rozciągania (redresji) przykurczonych mięśni. Wykorzystywany głównie w leżeniu lub siedzie.

PARESIS

dla pacjentów z porażeniem lub niedowładem wiotkim prostowników kolana. Progresywnie wspomaga wyprost stawu. Siła wyprostna zwiększa się wraz ze zgięciem stawu powyżej 45°. Wykorzystywany w reedukacji chodu.

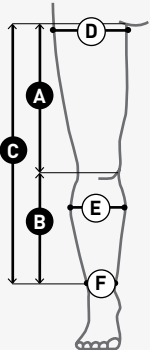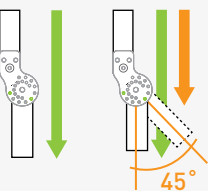

ERH 52/1		ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
DŁUGOŚĆ ORTEZY NA ODCINKU	A	ST. KOLANOWY-PACHWINA	15	18	21	24	27
	B	ST. KOLANOWY- -12 CM NAD ST. SKOKOWYM	15	20	30	35	38
	C	CAŁKOWITA	30	38	51	59	65
OBWÓD ORTEZY	D	W SKRAJNEJ CZĘŚCI UDOWEJ	34	40	46	52	58
	E	NA WYSOKOŚCI BRZUŚCA M. TRÓJGŁOWEGO	24	28	32	36	40
	F	OK. 10 CM NAD ST. SKOKOWYM	20	21	22	23	24

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ
KARTA POMIAROWA


NFZ /J.039

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleni i udo z regulacją zakresu ruchomości.

ERH 67/2

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY NA CAŁĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ Z SANDAŁEM

- ZASTOSOWANIE**
- / Przeznaczony jest dla pacjentów z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej o podłożu głównie neurologicznym.
 - / Stosowany przy niedowładzie i porażeniu mięśni prostowników kolana oraz stopy.
 - / Stan po złamaniach; staw rzekowy.
 - / Po zabiegach rekonstrukcyjnych.
- DZIAŁANIE**
- / Stabilizuje całą kończynę dolną.
 - / Umożliwia unieruchomienie w wyproście lub ograniczenie zakresu ruchu.

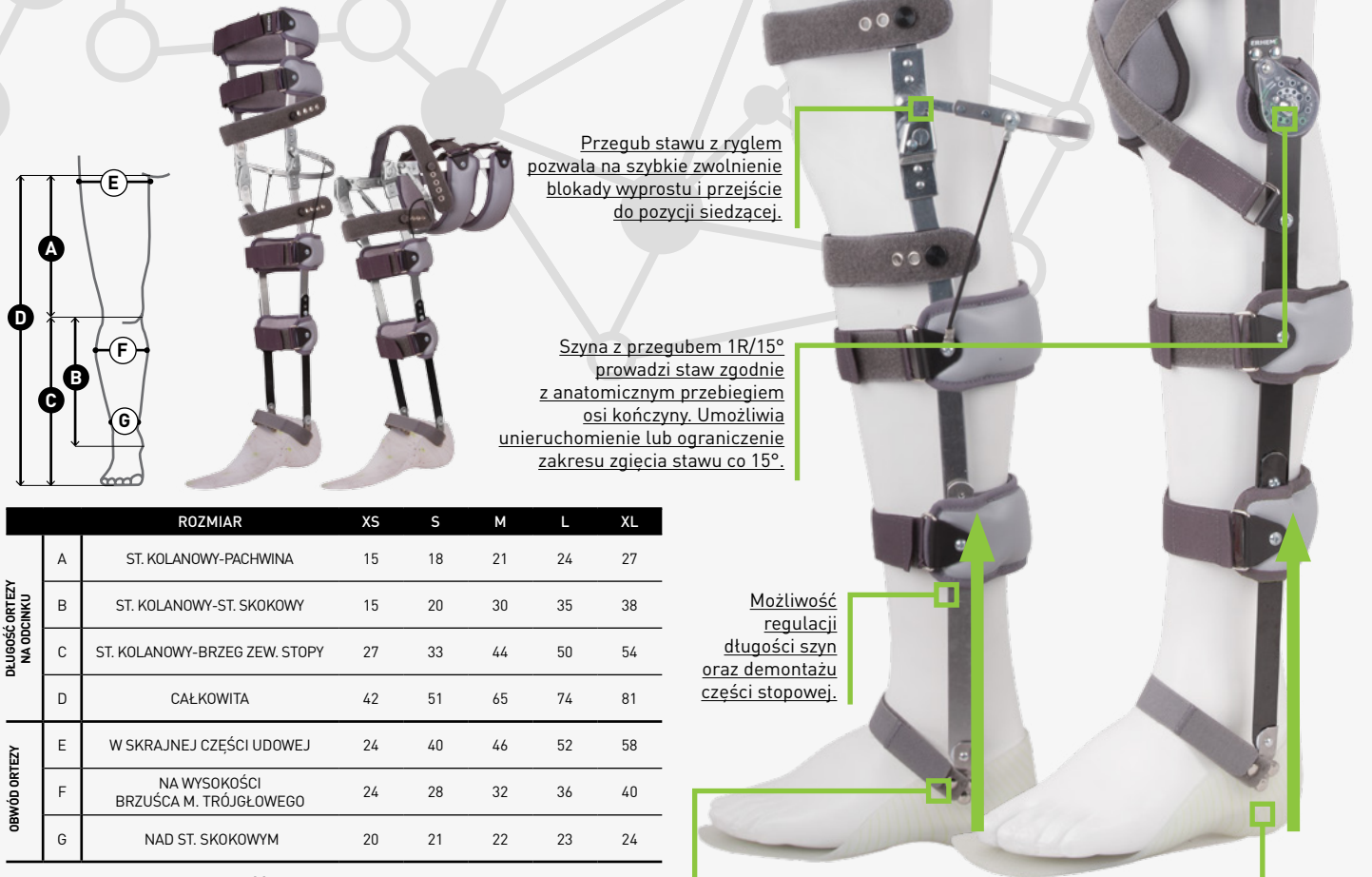

ROZMIAR		XS	S	M	L	XL	
DŁUGOŚĆ ORTEZY NA ODCINKU	A	ST. KOLANOWY-PACHWINA	15	18	21	24	27
	B	ST. KOLANOWY-ST. SKOKOWY	15	20	30	35	38
	C	ST. KOLANOWY-BRZEG ZEW. STOPY	27	33	44	50	54
	D	CAŁKOWITA	42	51	65	74	81
OBWÓD ORTEZY	E	W SKRAJNEJ CZĘŚCI UDOWEJ	24	40	46	52	58
	F	NA WYSOKOŚCI BRZUŚCA M. TRÓJGŁOWEGO	24	28	32	36	40
	G	NAD ST. SKOKOWYM	20	21	22	23	24

DŁUGOŚĆ STOPY OD 23 DO 30 (CO 1 CM)

PRZEGUB STAWU KOLANOWEGO: 1R/15°, LOCK LEVER (ZAMEK Z RYGLEM)

NFZ /J.043

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ KARTA POMIAROWA

Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym.

NFZ /H.030

INDYWIDUALNY

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy KAFO.

ERH 43/2

APARAT MODUŁOWY OTWARTY NA CAŁĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ Z SANDAŁEM

- KAPA STAWU KOLANOWEGO**
stabilizuje w wyproście oraz ułatwia pionizację.
- ZĘGARY STAWU KOLANOWEGO**
umożliwiają unieruchomienie lub ograniczenie zakresu zgięcia i wyprostu stawu co 15° (1R/15°).
- TAŚMY DOCIAGOWE**
umożliwiają dostosowanie wymiaru aparatu do indywidualnego obwodu uda i goleni.
- RUCHOME PRZEGUBY STAWU**
występuje w wersji z zachowaniem tylko ruchu zgięcia grzbietowego lub pełnego zakresu zgięcia grzbietowego i podszwowego stopy.
- ELASTYCZNE TWORZYWO**
dynamicznie przywraca stopę do pozycji pośredniej podczas ruchu.
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI DŁUGOŚCI SZYN PODUDZIA ORAZ DEMONTAŻU CZĘŚCI STOPEWY I KAPY STAWU KOLANOWEGO.**


ERH 43/2

ROZMIAR	XXS	XS	S	M	L	XL
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	39	47	55	64	72	80
ST. KOLANOWY -PACHWINA	14	17	20	24	27	30
ST. KOLANOWY -BRZEG ZEW. STOPY	25	30	35	40	45	50
DŁUGOŚĆ STOPY	OD 23-30 (CO 1 CM)					
MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA LUB SKRÓCENIA PODUDZIA O 3 CM						


DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI NA MIARĘ KARTA POMIAROWA

- ZASTOSOWANIE**
- / Przeznaczony dla pacjentów z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej o podłożu głównie ortopedycznym.
 - / Stan po złamaniach.
 - / Staw rzekowy.
 - / Zaburzenia osi stawu kolanowego - koślawość/szpotałość.
 - / Stan po zabiegach rekonstrukcyjnych.
 - / Niestabilność stawu na skutek porażenia i niedowładów mięśni.
- DZIAŁANIE**
- / Stabilizuje całą kończynę dolną.
 - / Umożliwia unieruchomienie w wyproście lub ograniczenie zakresu ruchu.
- NFZ /J.043
- Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym.
- NFZ /H.030
- INDYWIDUALNY
- Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy KAFO.


PRZEGUBY Z REGULACJĄ ZGIĘCIA I WYPROSTU

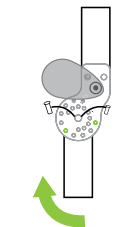


1R/15°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15°.
[-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°]

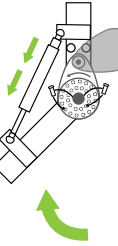


1R/15° NEUROEXTENSE
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15° oraz siłownik oddziałujący na przegub w kierunku wyprostnym.
[0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°]

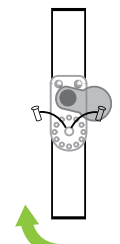

1R/30°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 30°.
[0°, 30°, 60°, 90°]

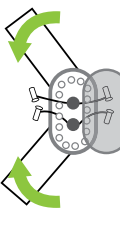


2R/20°
Dwuosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20°.
[0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°]

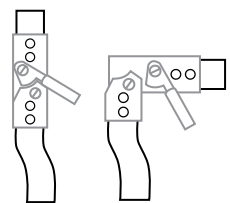


Lock Lever
Jednoosiowy przegub z rygłem zapadkowym. Pozwala poprzez uniesienie dźwigni na szybkie zwolnienie blokady wyprostu i uzyskanie pełnego zgięcia.

PRZEGUBY BEZ REGULACJI

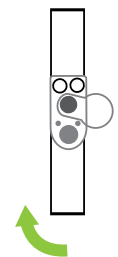

1
Jednoosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

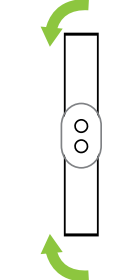

2
Dwuosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

BASIC SET



ERH 35/K
STR. 16



ERH 35
STR. 17



ERH 43
STR. 19



ERH 49
STR. 24



ERH 49/1
STR. 23



ERH 38
STR. 34



ERH 38/1
STR. 35



ERH 47/1
STR. 37



ERH 42
STR. 39



ERH 34
STR. 42



ERH 36
STR. 50



ERH 62
STR. 52



ERH 48/1
STR. 54



ERH 63
STR. 55

Wytwórca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach. Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Informacje zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia czy też innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista.

