


ERHEM

PRODUCENT ORTOTYKI

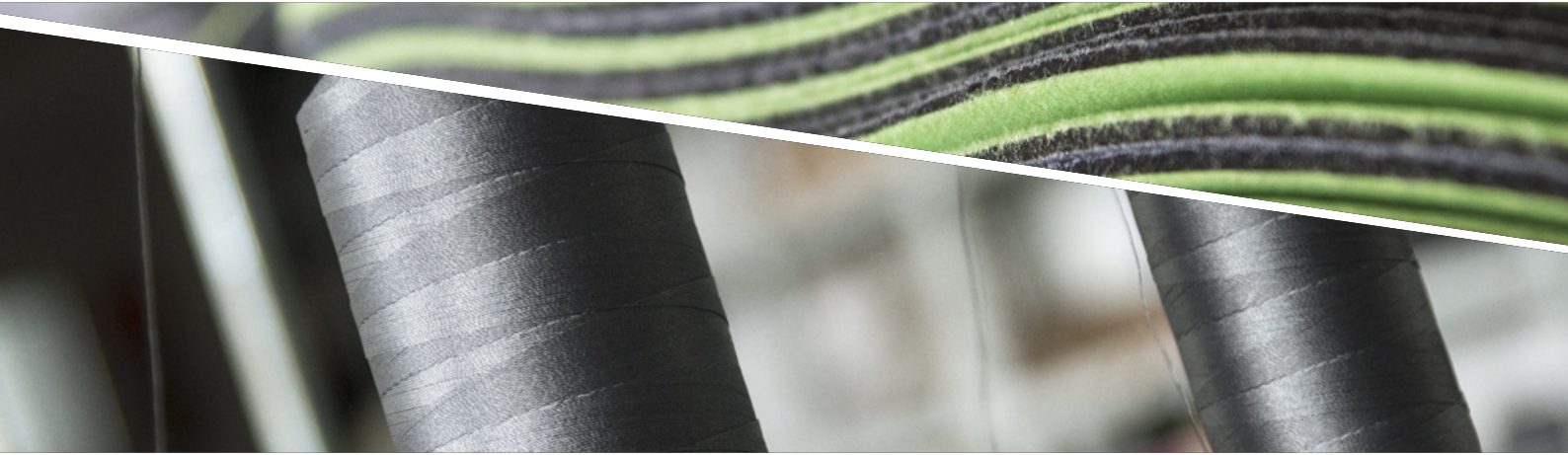

WYROBY DLA DOROSŁYCH

REHAORTHO

REHANEURO

REHAPROACTIVE



DZIAŁ SPRZEDAŻY

Umożliwi złożenie zamówienia oraz uzyskanie odpowiedzi związanych ze współpracą.

Tel.: 14 681 23 80

506 010 330

Fax: 14 681 23 85

poczta@erhem.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Odpowie na pytania dotyczące produktów i zamówień.

Tel.: 506 010 329

bok@erhem.pl

KOMPLEKSOWOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Firma ERHEM jest producentem obecnym na rynku od kilkunastu lat.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie wyrobów ortopedycznych, a także w produkcji elementów i podzespołów elektromechanicznych.

Szerokie zaplecze techniczne oraz wciąż poszerzane doświadczenie dają nam możliwość realizacji seryjnych oraz nietypowych projektów dostosowanych do indywidualnych wymagań pacjentów. Wszystkie produkty, od najmniejszych elementów, wykonywane są w naszym zakładzie.

IDEA

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działamy w sposób zintegrowany - w naszym zespole zatrudniamy osoby niepełnosprawne, co pozwala nam z większą empatią spojrzeć na potrzeby naszych klientów.

OFERTA

Stale doskonalimy proces produkcji i sprzedaży tak, aby finalnym efektem był produkt łączący innowacyjność z funkcjonalnym, a zarazem prostym działaniem.

Nasze wyroby stanowią uzupełnienie procesu kompleksowej REHABILITACJI pacjentów o odmiennych potrzebach i problematyce klinicznej.

NASZE PRODUKTY PODZIELILIŚMY NA TRZY GRUPY:



Wsparcie w procesie przywracania funkcji po znacznych urazach tkanek miękkich oraz kostnych.

Zabezpieczenie w pierwszym okresie po zabiegu.



Przeciwdziałanie powikłaniom.

Przywracanie mobilności oraz rozwijanie zdolności lokomocyjnych.



Profilaktyka urazów.

Ochrona w trakcie aktywności rekreacyjnej i sportowej.

Drobne urazy i przeciążenia.

WYRÓB INDYWIDUALNY


W przypadku, w którym niemożliwe jest zastosowanie wyrobu seryjnego, proponujemy wykonanie wyrobu na zamówienie indywidualne.

WYTWÓRCA
ERHEM Sp.j.
39-200 Dębica
ul. Puszkina 6
www.erhem.pl



ERH 53

PROSTOTRZYMACZ ORTOPEDYCZNY ÓSEMKA

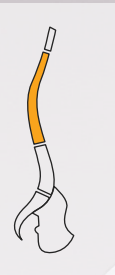

ORTEZA WYKONANA
z taśmy bawełnianej, obszytej
miękkim welurem.

**POSIADA MOŻLIWOŚĆ
ŁATWEJ REGULACJI**
siły odchylenia barków ku tyłowi.

ERH 53

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ W LINII PACHOWEJ	46-54	54-64	64-76	76-90	90-106

ZASTOSOWANIE


- / Leczenie zachowawcze złamań obojczyka.
- / Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy.
- / Plecy okrągłe.
- / Klatka lejkowata.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje obręcz barkową.
- / Koryguje kifozę piersiową.

ERH 53/1

PROSTOTRZYMACZ ELASTYCZNY Z USZTYWNIENIEM

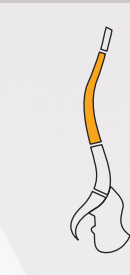

ELASTYCZNA TKANINA
zapewnia optymalne dopasowanie
oraz możliwość regulacji siły
odchylenia barków ku tyłowi.

WYPROFILOWANE STALKI
w części grzbietowej wzmacniają
działanie wyprostne ortezy.

ERH 53/1

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ W LINII PACHOWEJ	46-54	54-64	64-76	76-90	90-106

ZASTOSOWANIE

- / Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.
- / Choroba Scheuermanna.
- / Klatka lejkowata.

DZIAŁANIE

- / Odciąża i stabilizuje odcinek piersiowy kręgosłupa.
- / Działaniem wyprostnym koryguje kifozę piersiową.

ERH 60

PROSTOTRZYMACZ ELASTYCZNY Z USZTYWNIENIEM



STALKI W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ
wspomagają działanie wyprostne oraz odciążenie obejmowanego odcinka kręgosłupa.

ŁATWA REGULACJA WYSOKOŚCI CZĘŚCI GRZBIETOWEJ
pozwala na indywidualne dopasowanie do wzrostu pacjenta.

TAŚMY ŚCIAGAJĄCE
korygują ustawienie obręczy barkowej oraz wspomagają działanie wyprostne w odcinku piersiowym kręgosłupa.



ZASTOSOWANIE

- / Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy.
- / Plecy okrągłe.
- / Choroba Scheuermanna.
- / Zmiany osteoporotyczne.
- / ZZSK.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa.
- / Koryguje ustawienie obręczy barkowej oraz pogłębionej kifozy piersiowej.

ERH 60

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125

NFZ /M.059

Orteza (sznurówka) tułowa sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami.

ERH 37

PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY



LEKKI ORAZ ELASTYCZNY MATERIAŁ
gwarantuje właściwą kompresję oraz indywidualne dopasowanie.

PRAKTYCZNE UCHWYTY
ułatwiają zakładanie i zdejmowanie ortezy.

BOCZNE TAŚMY
umożliwiają regulację stopnia stabilizacji oraz ustalenie indywidualnej kompresji ortezy.

ERH 37/1

PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY WYSOKI

WZMOCNIENIA W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ
w postaci 2 metalowych stówek wspomagających pracę mięśni przykręgosłupowych.



ERH 37 | ERH 37/1

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125
WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: ERH 37 - 27 CM, ERH 37/1 - 33 CM						

NFZ /M.060

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stawkami lub fiszbinami.

ZASTOSOWANIE

- / Choroba zwyrodnieniowa.
- / Procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa.
- / Kręgoszyk.
- / Zmęczeniowe, przeciążeniowe bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
- / Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe.

DZIAŁANIE

- / W stopniu średnim stabilizują i odciążają dolny odcinek piersiowy oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.

ERH 36

PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY NISKI



ELASTYCZNY MATERIAŁ
zapewnia optymalną kompresję oraz komfort użytkowania.

CZTERY STALKI
części grzbietowej posiadają możliwość indywidualnego formowania.

TAŚMY KRZYŻOWE
umożliwiają anatomiczne dopasowanie oraz regulację stopnia stabilizacji.



ERH 36

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125
WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 20 CM						

NFZ /M.060

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stawkami lub fiszbinami.

ERH 61

ORTOPEDYCZNY PAS WZMACNIAJĄCY



ANATOMICZNY KSZTAŁT
NIE OGRANICZA ZAKRESU RUCHU
PODCZAS AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ.

PRAKTYCZNE UCHWYTY
UŁATWIAJĄ ZAKŁADANIE
I ZDEJMOWANIE ORTEZY.

ELASTYCZNE STALKI ORAZ PEŁOTA W TYLNEJ CZĘŚCI ORTEZY WSPOMAGAJĄ STABILIZACJĘ I ODCIĄŻENIE ODCINKA L-S ORAZ STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH.

ERH 61

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125
WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 25 CM						

NFZ /M.060

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stawkami lub fiszbinami.

ZASTOSOWANIE


- / Profilaktyka urazów i przeciążeń.
- / Zmęczeniowe, przeciążeniowe bóle odcinka L-S.
- / Dyskopatia.
- / Zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa.
- / Przewlekłe bóle dolnego odcinka kręgosłupa.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża odcinek lędźwiowy oraz przejście lędźwiowo-krzyżowe kręgosłupa.
- / Wspomaga pracę mięśni brzucha u osób wykonujących ciężką pracę fizyczną.

ERH 62

SZNUROWKA ŁĘDŹIOWO-KRZYŻOWA

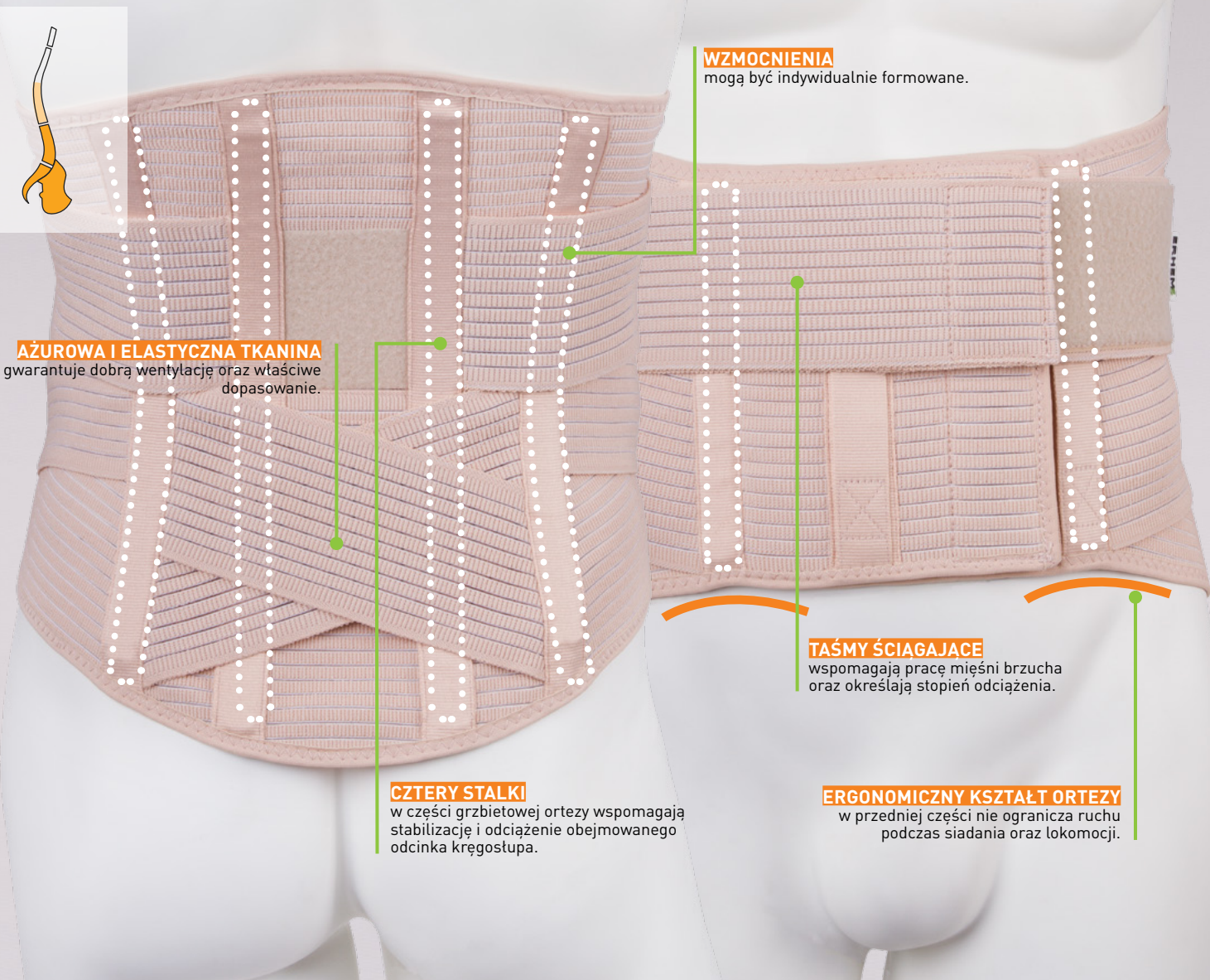

AŻUROWA I ELASTYCZNA TKANINA
gwarantuje dobrą wentylację oraz właściwe dopasowanie.

WZMOCNIENIA
mogą być indywidualnie formowane.

TAŚMY ŚCIĄGAJĄCE
wspomagają pracę mięśni brzucha
oraz określają stopień odciążenia.

ERGONOMICZNY KSZTAŁT ORTEZY
w przedniej części nie ogranicza ruchu
podczas siadania oraz lokomocji.

CZTERY STALKI
w części grzbietowej ortezy wspomagają
stabilizację i odciążenie obejmowanego
odcinka kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE

- / Kręgoszyk.
- / Dyskopatia.
- / Procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa.
- / Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe.
- / Wypukliny i wypadnięcia jądra miazdżystego - leczenie pooperacyjne lub zachowawcze.

DZIAŁANIE

- / W stopniu znacznym stabilizuje i odciąża dolny odcinek piersiowy oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.

ERH 62


ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125
WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 35 CM						

NFZ /M.059

Orteza (sznurówka) tułowiwa sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami.

ERH 48

WYSOKA SZNUROWKA PÓLSZTYWNA

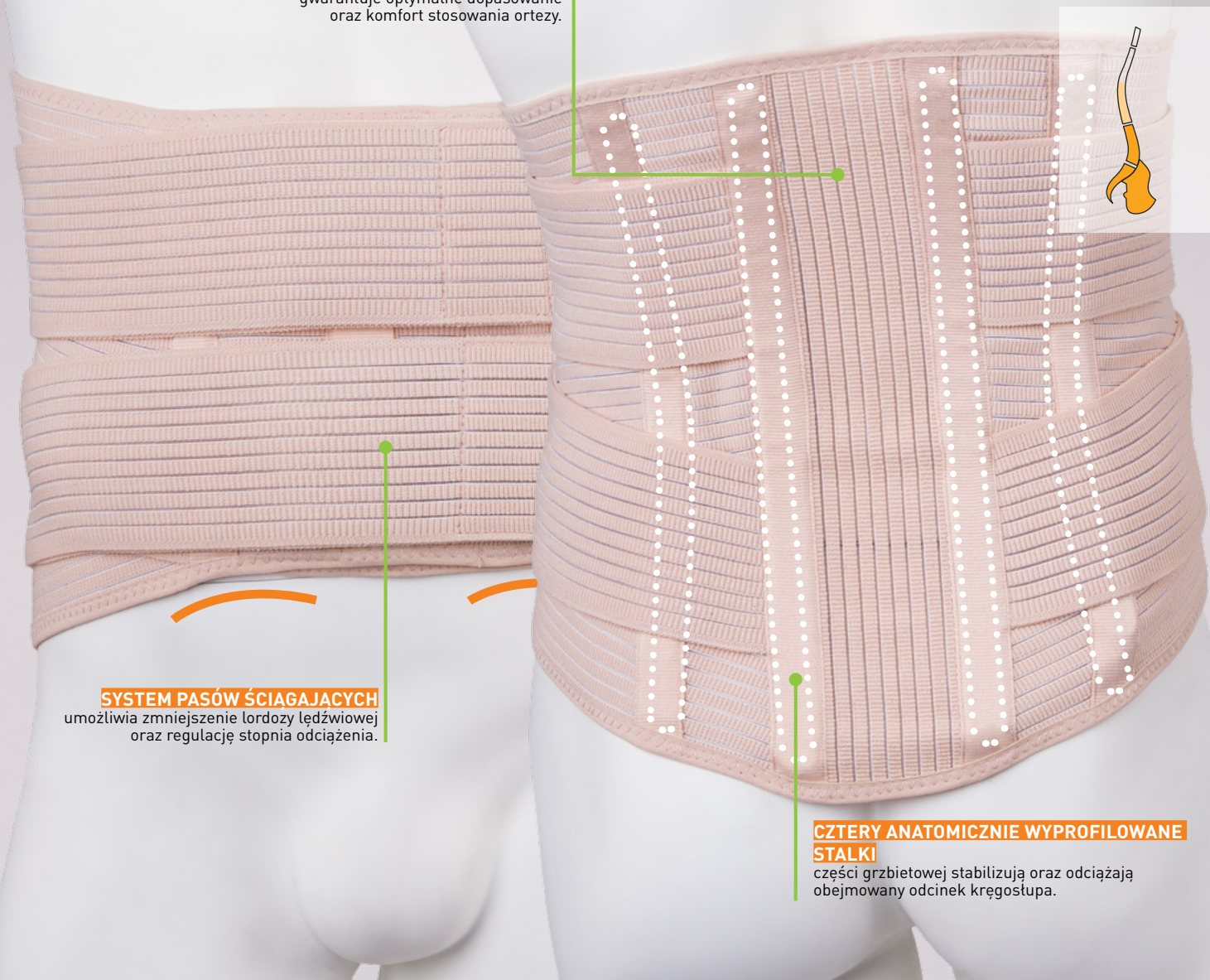

ELASTYCZNY MATERIAŁ
gwarantuje optymalne dopasowanie
oraz komfort stosowania ortezy.

SYSTEM PASÓW ŚCIĄGAJĄCYCH
umożliwia zmniejszenie lordozy lędźwiowej
oraz regulację stopnia odciążenia.

CZTERY ANATOMICZNIE WYPROFILOWANE STALKI
części grzbietowej stabilizują oraz odciążają
obejmowany odcinek kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE

- / Kręgoszyk.
- / Spondyloza; spondyloartroza.
- / Procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa.
- / Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe.
- / Wypukliny i wypadnięcia jądra miazdżystego - leczenie pooperacyjne lub zachowawcze.

DZIAŁANIE

- / W stopniu znacznym stabilizuje i odciąża dolny odcinek piersiowy oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.


ERH 48

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125
WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 35 CM						

NFZ /M.059

Orteza (sznurówka) tułowiwa sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami.

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA Z PODPASZKAMI

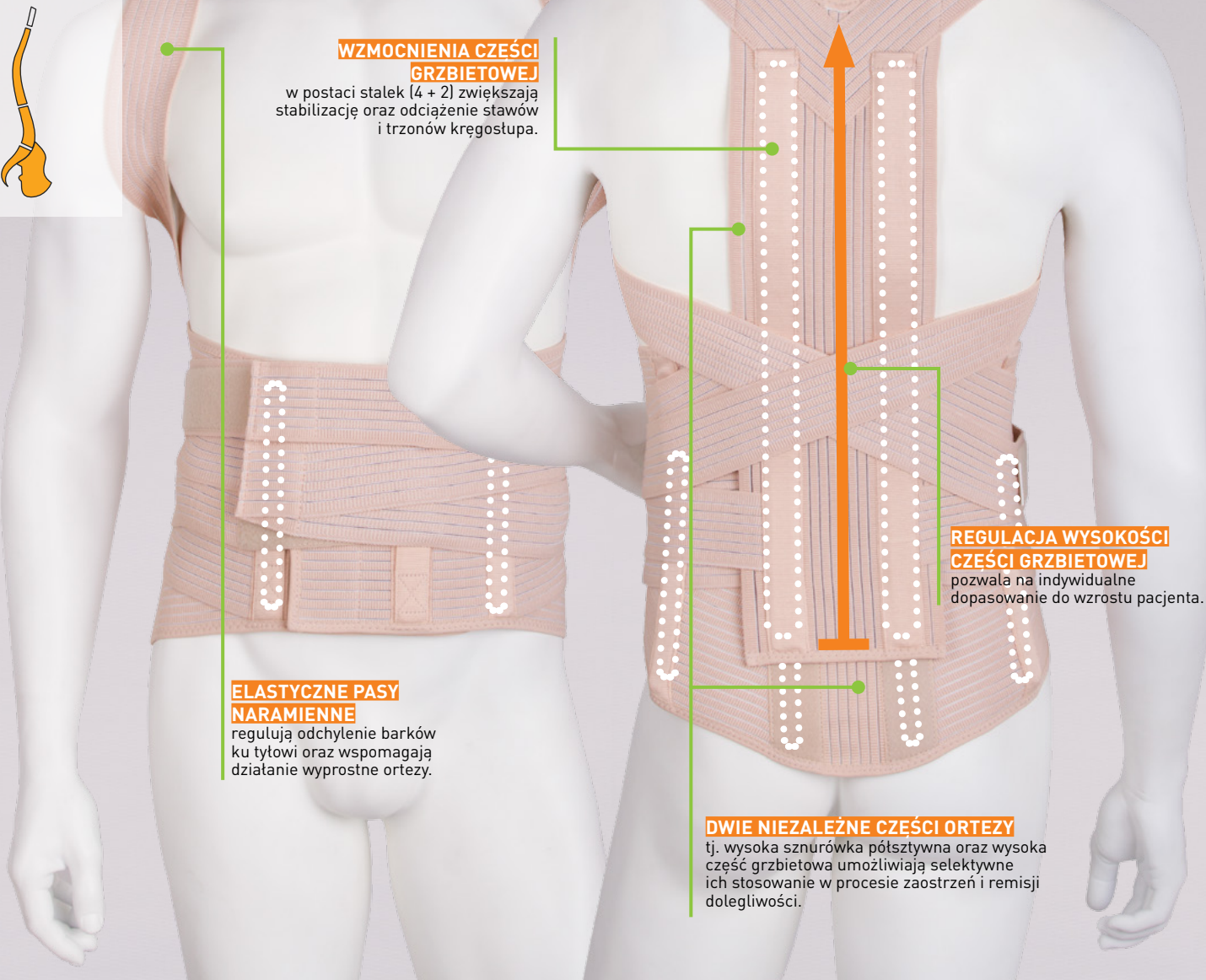

WZMOCNIENIA CZĘŚCI GRZBIETOWEJ

w postaci stulek (4 + 2) zwiększają stabilizację oraz odciążenie stawów i trzonów kręgosłupa.

REGULACJA WYSOKOŚCI CZĘŚCI GRZBIETOWEJ

pozwała na indywidualne dopasowanie do wzrostu pacjenta.

ELASTYCZNE PASY NARAMIENNE

regulują odchylenie barków ku tyłowi oraz wspomagają działanie wyprostne ortezy.

DWIE NIEZALEŻNE CZĘŚCI ORTEZY

tj. wysoka sznurówka półsztywna oraz wysoka część grzbietowa umożliwiają selektywne ich stosowanie w procesie zaostrzeń i remisji dolegliwości.

ZASTOSOWANIE

- / Zmiany osteoporotyczne.
- / ZZSK.
- / Stabilne złamania kręgosłupa.
- / Procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa.
- / Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe.
- / Choroba Scheuermanna.

DZIAŁANIE

- / Stabilizuje i odciąża odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.
- / Koryguje ustawienie obręczy barkowej oraz pogłębioną kifozy piersiowej.
- / W stopniu znacznym stabilizuje odcinek L-S kręgosłupa oraz zmniejsza lordozę lędźwiową.


ERH 48/1

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
OBWÓD PASA	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125

NFZ /M.059

Orteza (sznurówka) tułowi sztywna wysoka ze stulkami lub fiszbinami.

GORSET JEWETTA

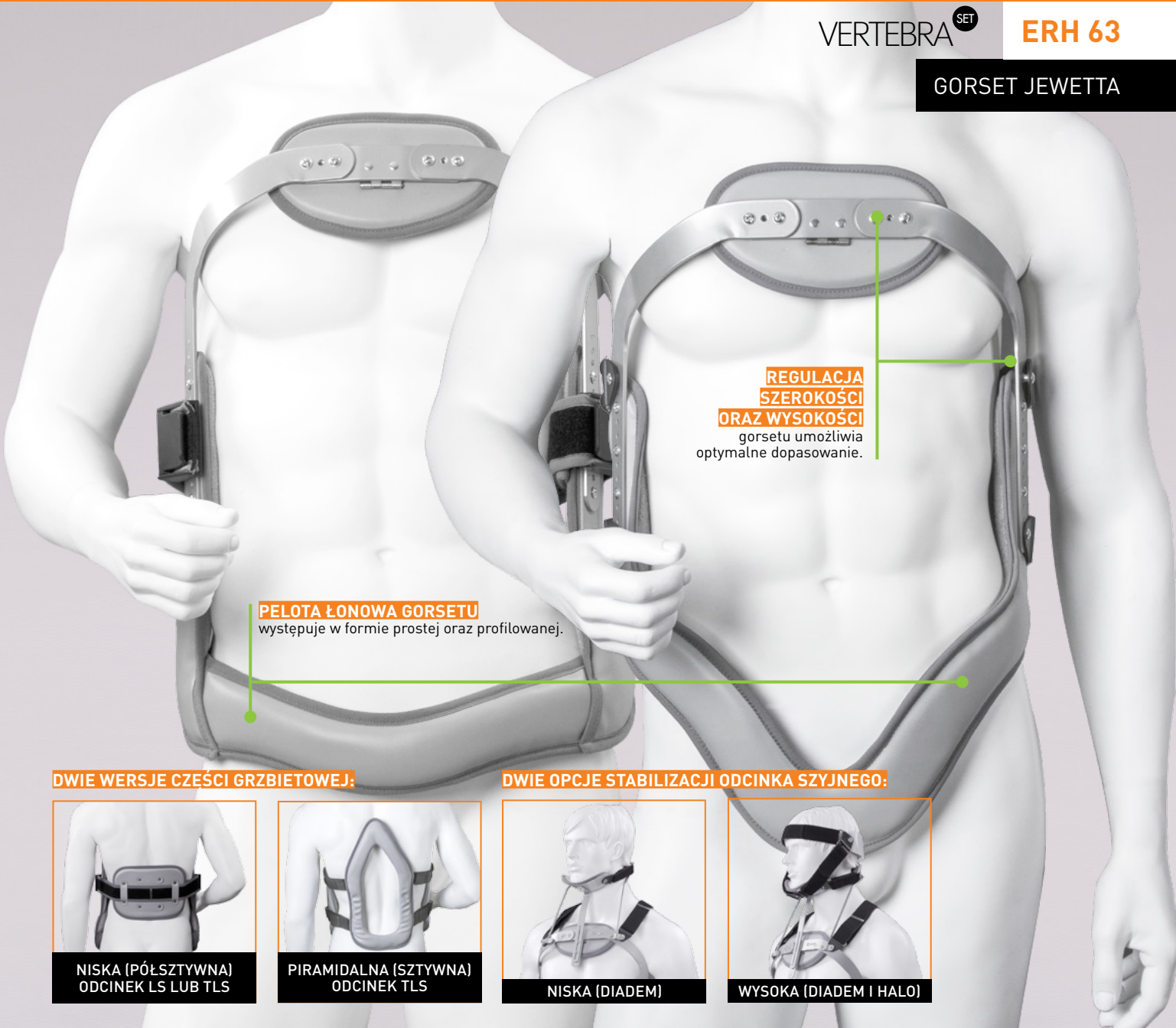

REGULACJA SZEROKOŚCI ORAZ WYSOKOŚCI

gorsetu umożliwia optymalne dopasowanie.

PEŁOTA ŁONOWA GORSETU

występuje w formie prostej oraz profilowanej.

DWIE WERSJE CZĘŚCI GRZBIETOWEJ:




NISKA (PÓŁSZTYWNA) ODCINEK LS LUB TLS



PIRAMIDALNA (SZTYWNA) ODCINEK TLS

DWIE OPCJE STABILIZACJI ODCINKA SZYJNEGO:

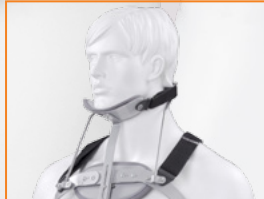

NISKA (DIADEM)



WYSOKA (DIADEM I HALO)

ERH 63

ROZMIAR	XS	S	M	L
OBWÓD W BIODRACH	50-70	60-80	80-105	105-130
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PEŁOTĄ PIERSIOWĄ A ŁONOWĄ	30-38	37-45	44-55	46-58

NFZ /M.057

Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

ZASTOSOWANIE

- / Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych.
- / Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym.
- / Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego.
- / Złamania patologiczne kręgow.
- / Doleczanie pooperacyjne.
- / Deformacje kręgosłupa.

DZIAŁANIE

- / Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa między Th6 - L5.

GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWEGO

DOKŁADNE DOPASOWANIE
ZAZNACZONYCH
elementów możliwe jest poprzez
ich doginanie.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEJ
REGULACJI WYSOKOŚCI
odcinka szyjnego umożliwia
indywidualne dopasowanie.

REGULACJA DŁUGOŚCI TAŚM
umożliwia indywidualne dopasowanie
oraz optymalną kompresję.



DWIE OPCJE STABILIZACJI
ODCINKA SZYJNEGO:
- niska (diadem)
- wysoka (diadem i halo)

DLA PRZYWRÓCENIA
CZYSTOŚCI,
wszystkie miękkie obszycia gorsetu
posiadają możliwość łatwego
demonażu.

USZTYWNIENIA CZĘŚCI
GRZBIETOWEJ
wspomagają stabilizację odcinka
piersiowego.

TRZYPUNKTOWY GORSET BAhLERA/VOIGHTA

GORSET POSIADA MOŻLIWOŚĆ
DODATKOWEGO FORMOWANIA
zaznaczonych pelot poprzez ich doginanie.

PŁYNNA REGULACJA WYSOKOŚCI
ORAZ SZEROKOŚCI GORSETU
umożliwia jego indywidualne dopasowanie.

DLA PRZYWRÓCENIA CZYSTOŚCI
wszystkie miękkie obszycia gorsetu
posiadają możliwość łatwego
demonażu.

- ZASTOSOWANIE**
- / Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych.
 - / Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym.
 - / Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego.
 - / Deformacje kręgosłupa.

- DZIAŁANIE**
- / Stabilizuje i odciąża segmenty kręgosłupa w zakresie C3-Th5/6 lub C1-Th5/6.

ROZMIAR	S	L
WZROST PACJENTA	do 145	od 145

NFZ /M.057
Gorset stabilizująco-unieruchamiający.
NFZ /Ł.054 INDYWIDUALNY
Gorset odciążająco-stabilizujący.


ROZMIAR UNIWERSALNY
REGULACJA ODLEGŁOŚCI PEŁOTY ŁONOWEJ OD MOSTKOWEJ W ZAKRESIE 37-53 CM

NFZ /M.057
Gorset stabilizująco-unieruchamiający.
NFZ /Ł.054 INDYWIDUALNY
Gorset odciążająco-stabilizujący.

- ZASTOSOWANIE**
- / Doleczanie po gorsetowaniu gipsowym.
 - / Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego.
 - / Stabilne złamania kompresyjne trzonów oraz wyrostków stawowych.
 - / Złamania osteoporotyczne kręgow.
 - / Zmiany zwyrodnieniowe.

- DZIAŁANIE**
- / Gorset o działaniu wyprostnym, stabilizuje i odciąża kręgosłupa TLS głównie w płaszczyźnie strzałkowej.

GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO

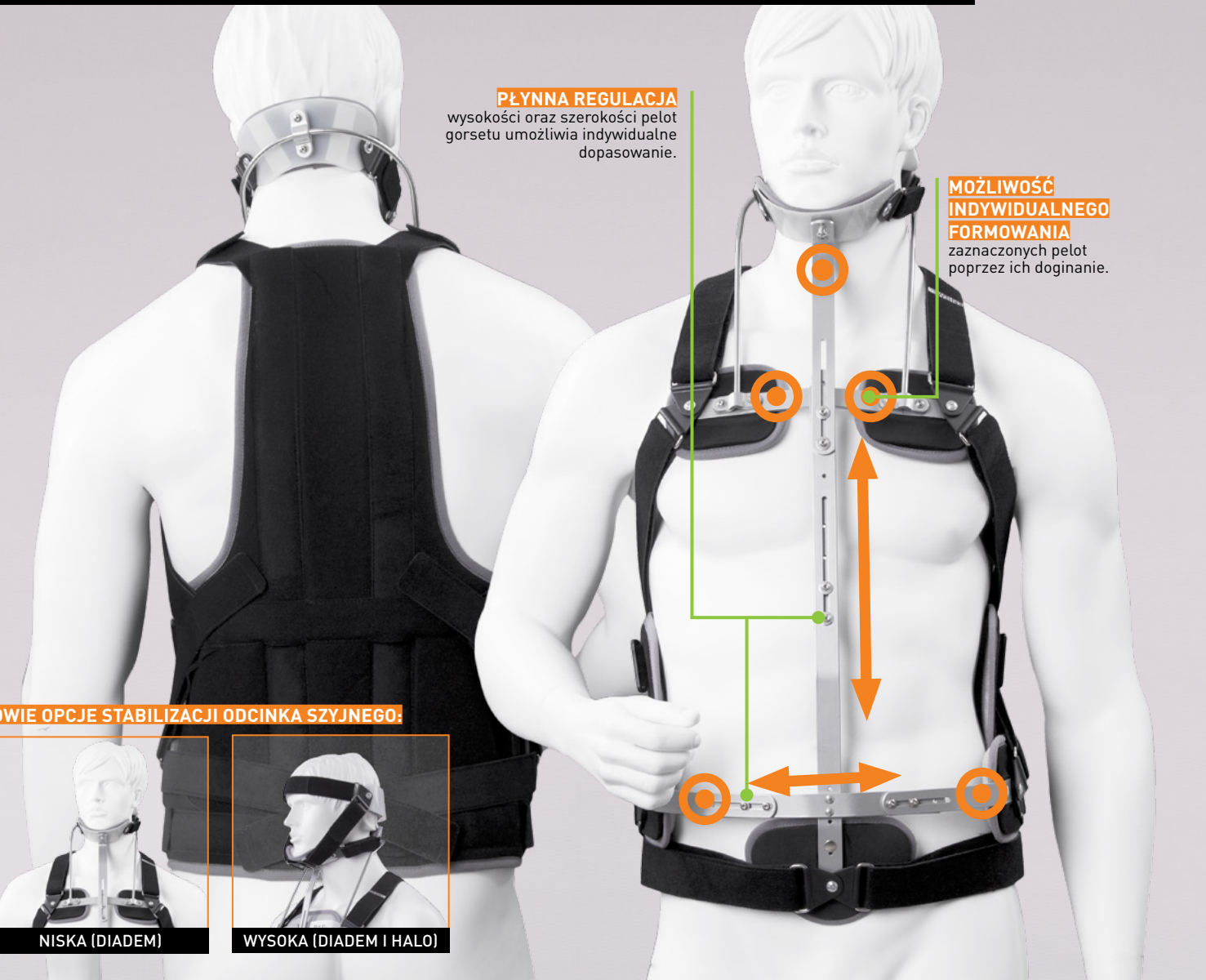

- ZASTOSOWANIE**

 - / Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych.
 - / Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym.
 - / Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego.
 - / Doleczanie pooperacyjne.
 - / Deformacje kręgosłupa.
 - / Złamania patologiczne.
- DZIAŁANIE**

 - / Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa w zakresie C3-L5 lub C1-L5.

ERH 64

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD PASA	65-80	80-95	95-110
WZROST PACJENTA	A: DO 165 CM	B: PONAD 165 CM	

NFZ /M.057
Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

NFZ /L.054 INDYWIDUALNY
Gorset odciążająco-stabilizujący.

PRZEGUBY Z REGULACJĄ ZGIĘCIA I WYPROSTU

1R/15°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15°.
(-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

1R/15° NEUROEXTENSE
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 15° oraz siłownik oddziałujący na przegub w kierunku wyprostnym.
(0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

1R/30°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 30°.
(0°, 30°, 60°, 90°)

2R/20°
Dwuosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20°.
(0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°)

Lock Lever
Jednoosiowy przegub z rygłem zapadkowym. Pozwala poprzez uniesienie dźwigni na szybkie zwolnienie blokady wyprostu i uzyskanie pełnego zgięcia.

PRZEGUBY BEZ REGULACJI

1
Jednoosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

2
Dwuosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu.

Wytwórca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach. Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Informacje zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia czy też innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista.

BASIC SET

ERH 35/K

STR. 16



ERH 35

STR. 17



ERH 43

STR. 19



ERH 49

STR. 24



ERH 49/1

STR. 23



ERH 38

STR. 34



ERH 38/1

STR. 35



ERH 47/1

STR. 37



ERH 42

STR. 39



ERH 34

STR. 42



ERH 36

STR. 50



ERH 62

STR. 52



ERH 48/1

STR. 54



ERH 63

STR. 55

